



myplant two

Produktkatalog



Made in Germany
Made by MEISINGER

myplant

T W O

Implantate von der Biologie inspiriert

Das Konzept eines zweiphasigen Titanimplantats mit speziellem Expansionsgewinde und selbsthemmendem Konus als Abutmentverbindung wurde bereits vor über 30 Jahren von Herrn Prof. Dr. med. dent. Nentwig und Herrn Dr.-Ing. Moser entwickelt und zur klinischen Reife gebracht. Hohe Primärstabilität, minimale Baugröße, eine nahezu mikrobewegungsfreie und bakteriendichte Implantat-Abutmentverbindung sowie ein tiefes Platform-Switching erwiesen sich bald als überlegene Eigenschaften hinsichtlich der erzielbaren Knochen- und Weichgewebsstabilität und damit als Garanten eines herausragenden Langzeiterfolges.

Mit dem **myplant two** Implantatsystem wurde dieses über Jahrzehnte dokumentierte Konzept von Prof. Nentwig und Dr. Moser weiterentwickelt, optimiert und an die Kriterien einer modernen, zukunftsorientierten Implantat-Therapie angepasst.

Wir bei **MEISINGER** haben es uns zur Aufgabe gemacht, Patienten und Anwendern zufriedenstellende Lösungen für sowohl chirurgisch als auch ästhetisch anspruchsvolle Situationen zu bieten. Das myplant two Implantatsystem ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Zahnimplantaten und leistet seinen Beitrag für einen langfristigen Implantaterfolg mit dauerhafter Hart- und Weichgewebestabilität.

Inhalt

Unsere Bestell-Serviceleistungen	2
myplant two auf einen Blick	3
Die wichtigsten System-Merkmale	3
Die Farbcodierung	4
Schnellübersicht Indikationen	5
Die Implantatoberfläche	6
Das Gewindedesign	6
Die Implantateinbringtechnik	7
Insertion des Implantats	8
Subkrestale Platzierung, Stabile Weichgewebsunterstützung	10
Lösen der Einbringeinheit	10
Die myplant Prothetik	12
Produkte - Implantate und Prothetik	14
myplant two Implantate	14
myplant two Prothetik	15
Chirurgische Instrumente	30
Zubehör und Sortimente	36
Weitere Informationen	48
Schnellübersicht chirurgisches Vorgehen	49
Empfohlene Drehmomente für die Prothetik	50
Materialübersicht	51
Allgemeine Hinweise	52
myplant-Garantie	53
Index	57

Hinweis: Nicht alle in diesem Katalog abgebildeten Artikel sind jederzeit und in jedem Land verfügbar.

Unsere Bestell-Serviceleistungen

Bestellannahme & Beratungshotline

Unsere Bestellannahme und Beratungshotline ist in der folgenden Zeit für Sie erreichbar:

Montag – Donnerstag	8:00 – 18:00 Uhr
Freitag	8:00 – 16:00 Uhr

Bei einem Bestelleingang in der folgenden Zeit garantieren wir Ihnen einen Wareneingang noch am gleichen Tag:

Montag – Donnerstag	bis 14:00 Uhr
Freitag	bis 13:00 Uhr

Lieferzeiten & Lieferkosten (Deutschland)

Standard-Lieferservice

7,10 € Lieferzeit 1-3 Arbeitstage

Express- Lieferservice

Zustellung am nächsten Arbeitstag

7,10 €* nächster Arbeitstag bis 18:00 Uhr
16,30 €* bis 12:00 Uhr* ¹
21,50 €* bis 10:30 Uhr* ¹
Feiertags Kein Lieferservice

*Die angegebenen Versandkosten gelten zzgl. USt. in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

*¹ Alle angegebenen Zustellzeiten sind Richtlinien unseres Transportpartners.

Die angegebenen Zustellzeiten sind Richtzeiten unserer Transportpartner und können situationsbedingt abweichen.

Rückgaberecht

- Nur originalverpackte, einwandfreie und ungeöffnete Ware
- Rückgaberecht innerhalb von 30 Tagen mit Rechnungskopie (Gültigkeit ab Rechnungsdatum)

myplant two auf einen Blick

Die wichtigsten System-Merkmale

Das Implantatsystem fußt auf seit Jahrzehnten in der klinischen Praxis bewährten Konstruktionsprinzipien eines progressiven Gewindedesigns sowie einer nahezu bakterienundichten, selbsthemmenden und rotationsstabilen Konusverbindung zwischen Implantat und Abutment. Die Aufbaukomponenten sind wahlweise indexiert und nicht-indexiert erhältlich.



Prothetische Komponenten sind optional **indexiert** und **nicht-indexiert** erhältlich!

Tiefes **Platform Switching** bietet eine vergrößerte Auflagerungsfläche für den Knochen

Bei ausreichendem Knochenangebot **subkrestal inserierbar**

Selbsthemmende, rotationsstabile Konusinnenverbindung schließt nahezu bakterienundicht ab

Apikaler Anschnitt zum vereinfachten Einbringen des Implantats

Definierte Positionierung durch Auswahl der indexierten Prothetikkomponente oder freie Positionierung abgewinkelter Abutments durch nicht-indexierte Komponenten

Abgerundetes Apex-Design für die gewebeschonende Implantation z. B. im Falle einer Sinusbodenelevation

Die Farbcodierung

	Rot	Implantatdurchmesser 3.5 mm
	Orange	Implantatdurchmesser 4.0 mm
	Gelb	Implantatdurchmesser 4.5 mm

Die Bezeichnung des Implantats enthält einen Großbuchstaben, der – genau wie die Farbmarkierung – für einen der drei Implantatdurchmesser steht. Die nachgestellten Ziffern geben die Länge des Implantats in Millimetern an.



Ø [mm]	L [mm]				
	6.6	8.0	9.5	11.0	14.0
3.5	A 6.6	A 8	A 9.5	A 11	A 14
4.0	M 6.6	M 8	M 9.5	M 11	M 14
4.5	B 6.6	B 8	B 9.5	B 11	B 14


Schnellübersicht Indikationen

Implantate			Prothetik		
myplant two	Länge	Frontzahn Eckzahn Prämolaren Molaren	Einzelzahn	Brücke	Teleskope Kugelanker LOCATOREN®
Ø 3.5 mm	 6.6 mm	✓*	X	✓	✓*
	 8.0 mm	✓	✓	✓	✓
	 9.5 mm	✓	✓	✓	✓
	 11.0 mm	✓	✓	✓	✓
	 14.0 mm	✓	✓	✓	✓
Ø 4.0 mm	 6.6 mm	✓*	X	✓	✓*
	 8.0 mm	✓	✓	✓	✓
	 9.5 mm	✓	✓	✓	✓
	 11.0 mm	✓	✓	✓	✓
	 14.0 mm	✓	✓	✓	✓
Ø 4.5 mm	 6.6 mm	✓*	X	✓	✓*
	 8.0 mm	✓	✓	✓	✓
	 9.5 mm	✓	✓	✓	✓
	 11.0 mm	✓	✓	✓	✓
	 14.0 mm	✓	✓	✓	✓

✓* Spezielle Indikationen für Implantate mit 6.6 mm Länge:
Durch die reduzierte Verankerungsfläche im Knochen sind Implantate mit 6.6 mm bis zum Vorliegen entsprechender klinischer Studien zurzeit nur für folgende Indikationen empfohlen:
• Bei zahnlosen Kiefern: als Hilfsimplantat/Unterstützungsimplantat für Implantat getragene Stegkonstruktionen oder verblockte Brücken.
• Teilbezahnte Kiefer: als Hilfsimplantat/Unterstützungsimplantat in Verbindung mit längeren Implantaten zu einer Suprakonstruktion verblockt.
Wichtig: Es sollte auf die Lastenverteilung der Prothetik geachtet werden.

Die Implantatoberfläche

Die enossale Oberfläche der Implantate wird mit Korund gestrahlt, um eine makrorauhe Struktur zu erzeugen. Anschließend erfolgt eine Säureätzung, welche eine Mikrorauheit der Implantatoberfläche zur Folge hat. Die resultierende maximale Oberflächenvergrößerung fördert die Anlagerung von Knochengewebe, sodass ein stabiler Implantat-Knochen-Verbund entsteht und der natürliche Heilungsprozess unterstützt wird.

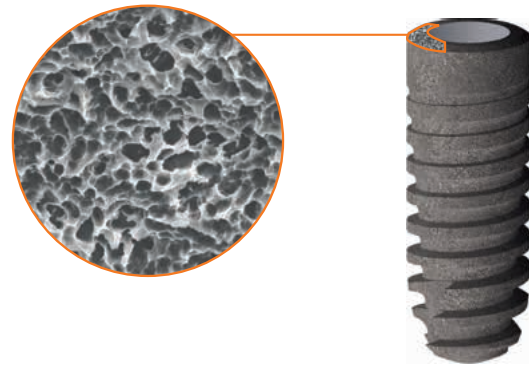

Das Gewindedesign

Das progressive Gewindedesign der Implantate führt auch bei durchschnittlichen Knochenqualitäten zu hoher Primärstabilität.

Die zunehmende Tiefe des Gewindes nach apikal und ein entsprechend konischer Implantatkörper mit bogenförmiger Krümmung der Gewindeflanken sorgen für eine biomechanisch günstige Lasteinleitung in den Knochen. Auftretende laterale und vertikale Kräfte werden primär in die elastischere Spongiosa abgeleitet, während die Kortikalis entlastet wird.


Die Präparationstechnik und das spezielle Design sind optimal auf die vorkommenden strukturellen Varianten des Alveolarknochens abgestimmt und führen selbst bei einer kompromittierten Knochenfestigkeit zu einer hohen Primärstabilität mit maximalem Knochen-Implantat-Kontakt.




Die Implantateinbringtechnik

Entnahme des Implantats

Alle myplant Implantate werden steril geliefert und sind für die einmalige Anwendung vorgesehen. Falls die Verpackung beschädigt ist, ist das Implantat nicht zu verwenden. Zur Entnahme wird das Implantat im äußeren Blister aus der Faltschachtel entnommen.

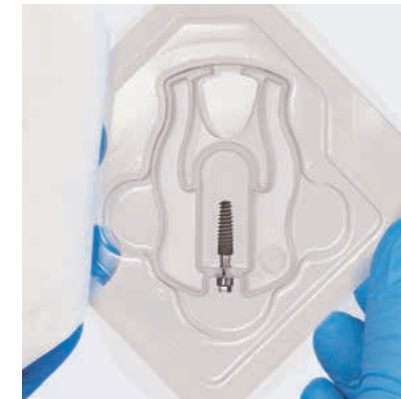


Nach vollständigem Entfernen der Umverpackung und des äußeren Blisters, öffnen Sie den inneren Blister soweit, dass Sie die Implantathalteklammer entnehmen können. Die Verschlusschraube bleibt weiterhin verdeckt.

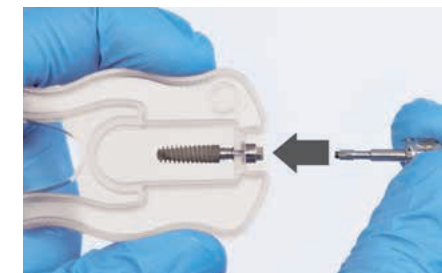

HINWEIS: Der O-Ring des Eindrehinstrumentes kann nach mehreren Sterilisationszyklen porös werden und muss ausgetauscht werden, um einen sicheren Halt des Implantats gewährleisten zu können.

Sichern Sie die Halteklammer mit Finger und Daumen an den vorderen Griffmulden und setzen das Eindrehinstrument auf die Einbringeinheit auf, sodass zwischen Einbringeinheit und Eindrehinstrument eine Klemmpassung entsteht.

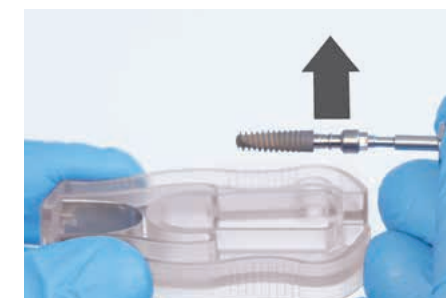


Drücken Sie nun die Implantathalteklammer an den hinteren Griffmulden leicht zusammen und entnehmen Sie das Implantat.

Insertion des Implantats

Die Insertion der myplant Implantate kann sowohl maschinell als auch manuell erfolgen. Bei subkrestaler Einbringung sind die Hilfslinien am Eindrehinstrument im Millimeterabstand zu beachten.

Der myplant two Einbringpfosten ...

- ... unterstützt die subkrestale Insertion.
- ... enthält Tiefenmarkierung für die kontrollierte subkrestale Platzierung.
- ... ermöglicht die gezielte Ausrichtung der Indexposition.

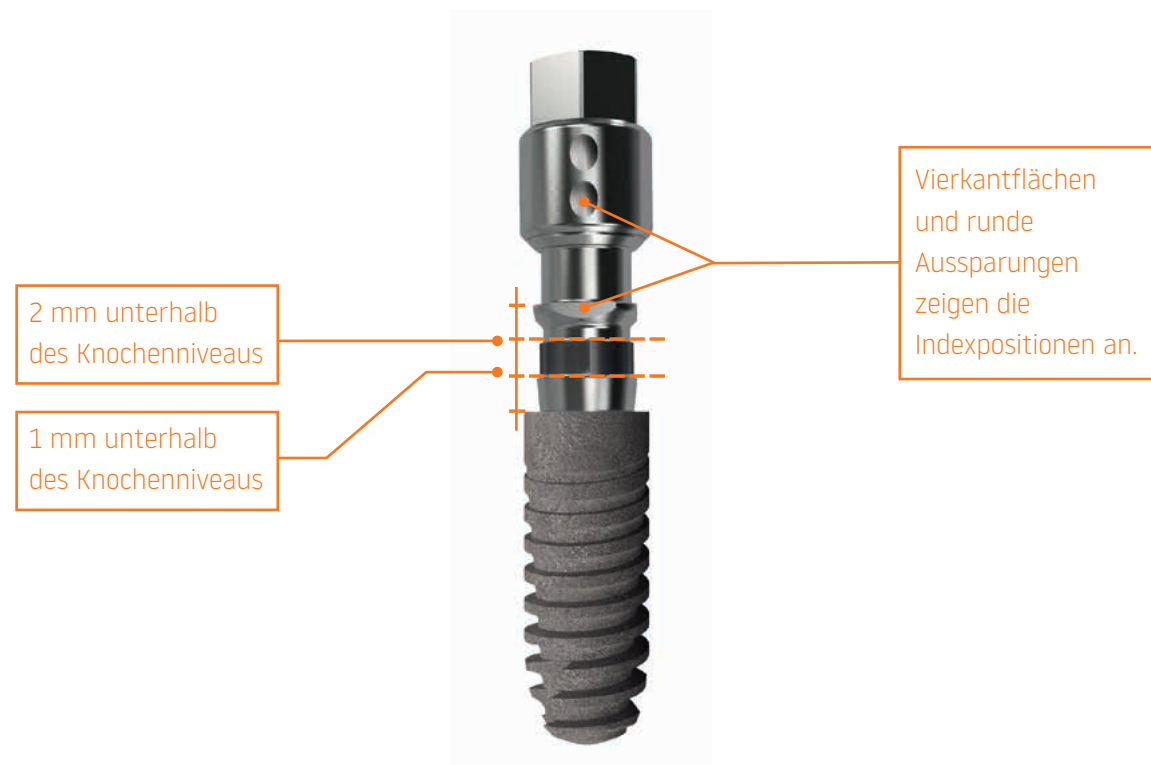

Maschinell:

Mit Hilfe des maschinell einsetzbaren Eindrehinstruments wird das Implantat in das präparierte Implantatbett eingesetzt und im Uhrzeigersinn mit maximal 15 min^{-1} in die Endposition gebracht. Das Drehmoment in der Endposition ist der chirurgischen Antriebseinheit zu entnehmen und zu dokumentieren. Falls keine elektronische Aufzeichnung des Drehmoments erfolgt, wird unter Zuhilfenahme der Ratsche und des Drehmomentaufsatzes das Drehmoment in der Endposition ermittelt und dokumentiert.

Manuell:

Mit Hilfe des Eindrehinstruments und des Handrads wird das Implantat zu ca. zwei Dritteln händisch in das präparierte Implantatbett eingebracht. Die finale Positionierung erfolgt mit Hilfe der Ratsche.

Dabei gilt folgende Zuordnungsempfehlung:


- < 15 Ncm: geringe Primärstabilität: lastfreie Einheilung (subgingival) erforderlich
- > 15 Ncm < 35 Ncm: ausreichende Primärstabilität: Transgingivale Einheilung oder provisorische Sofortversorgung im Verbund mit weiteren primärstabilen Implantaten möglich
- > 35 Ncm: gute Primärstabilität: Provisorische Sofortversorgung einzeln stehender, unblockter Implantate möglich

Bei der Insertion des myplant Implantats darf ein maximales Eindrehmoment von 50 Ncm nicht überschritten werden. Das Eindrehmoment steigt zunehmend je tiefer sich das Implantat ins Implantatbett arbeitet. Sollte das Eindrehmoment den maximal erlaubten Wert erreichen, bevor die finale Implantatposition erreicht wurde, muss das Implantat mit Hilfe des Rückdrehinstruments entfernt werden, um eine Knochenschädigung zu vermeiden.

Durch eine weiterführende Nachbereitung des Implantatbetts, mittels Ausreiber und/oder Gewindeschneider, kann das Eindrehmoment situationspezifisch beeinflusst und das Implantat erneut eingesetzt werden. Wichtig ist, dass das inserierte Implantat primärstabil ist, um eine anschließende erfolgreiche Osseointegration zu ermöglichen.


Subkrestale Platzierung, Stabile Weichgewebsunterstützung

Die Stirnfläche der myplant Implantate ist ebenfalls oberflächenbehandelt und weist somit eine Mikrorauheit auf, welche die Anlagerung von natürlichem Knochengewebe fördert. Deshalb sollten die myplant Implantate bei ausreichend vertikalem Knochenangebot idealerweise ca. 1 mm subkrestal positioniert werden. Eine subkrestale Platzierung ermöglicht das Anwachsen von Knochengewebe direkt auf der Implantatschulter, was die Stabilität der Weichgewebsmanschette unterstützt und langfristig für eine hohe Stabilität des knöchern integrierten Implantats sorgt. Eine Verbesserung des prothetischen Ergebnisses bei geringem Weichgewebsangebot kann ebenfalls erzielt werden.

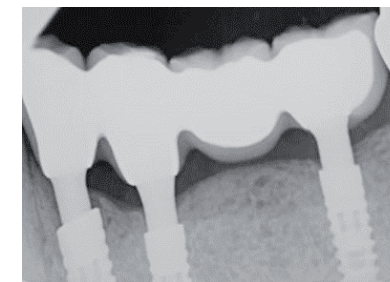

HINWEIS: Der vertikale Platzbedarf bezüglich einer subkrestalen Implantatpositionierung ist bereits während der präimplantologischen Planung zu berücksichtigen, um das Risiko umliegende Strukturen zu schädigen, zu vermeiden.

Der vergleichsweise große Versatz zwischen Implantat- und Abutmentdurchmesser und die daraus resultierende breite Implantatschulter ermöglichen mehr Approximalraum auf Abutmentniveau als nicht-konische Verbindungen. Dies ist in Verbindung mit der knöchernen Ablagerung auf der Implantatschulter ausschlaggebend für die Etablierung einer stabilen und gesunden Weichgewebsumschette, der Ausbildung der Papille und eine langfristig zufriedenstellende sog. rote Ästhetik. Diese Ergebnisse können selbst bei eng gesetzten Implantaten durch den vergleichsweise größeren Approximalraum erzielt werden.

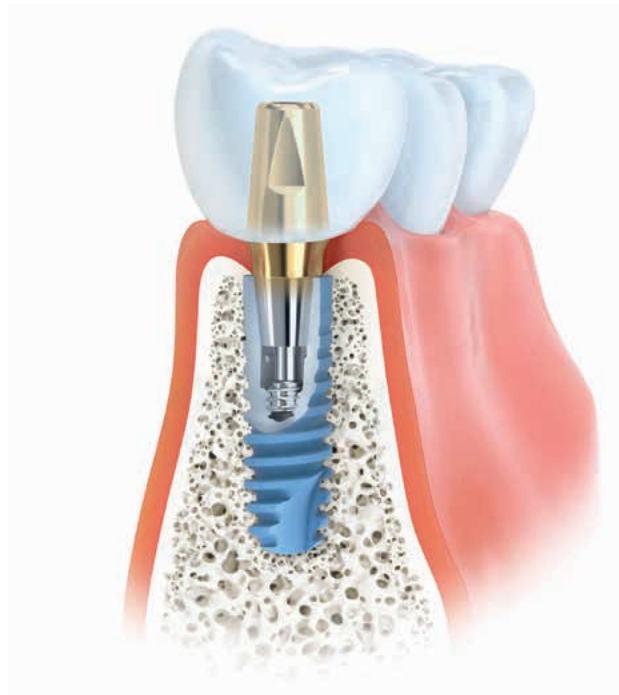

Lösen der Einbringeinheit



Vorgehen ohne Hülsenschlüssel


Um die Einbringeinheit nach der Insertion vom Implantat zu lösen, wird zunächst die Einbringeinheit mit dem Gabelschlüssel gegen Verdrehen fixiert. Dazu wird der Gabelschlüssel über die verjüngte Stelle des Eindrehinstrumentes geschoben und dann auf den Einbringpfosten gesetzt. Hierbei greift der Gabelschlüssel den Sechskant der Einbringeinheit und kann nicht abrutschen. Anschließend wird die Schraube der Einbringeinheit mit Hilfe des Eindrehinstrumentes gegen den Uhrzeigersinn gelöst.



Aufsetzen des Gabelschlüssels zum Kontern und Lösen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn (maschinell oder manuell)

Vorgehen mit Hülsenschlüssel

Wird es aus Platzgründen notwendig, die Kontermöglichkeit oberhalb des Okklusionsniveaus zu platzieren, ist maschinell zu inserieren. Hierfür wird - bevor das Implantat aufgenommen und inseriert wird - der Hülsenschlüssel (ZHS01) auf das Eindrehinstrument L (ZEI02) geschoben, bis es spürbar einrastet. Nach erfolgter Insertion wird der Hülsenschlüssel mit dem Gabelschlüssel an der dafür vorgesehenen Aufnahme gekontert und die Schraube der Einbringeinheit gegen den Uhrzeigersinn gelöst. Hierfür ist an der Maschine der Linkslauf einzustellen.

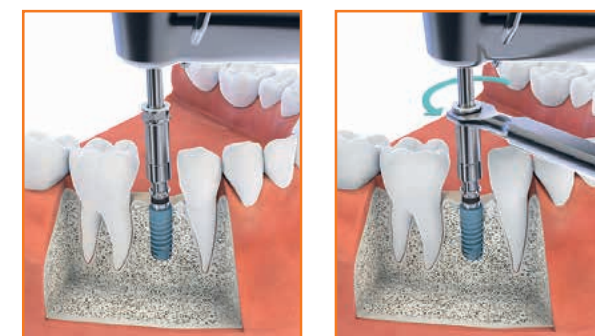

Aufsetzen des Gabelschlüssels zum Kontern und Lösen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn (maschinell)

Die myplant Prothetik

Ein Implantat – zwei Lösungswege

Indexiertes (vier Positionen) & nicht-indexiertes Abutment –
Identische Konusdimension für alle Implantatdurchmesser

1

Die **indexierten** prothetischen Komponenten ermöglichen eine definierte Positionierung des Abutments durch das Labor.



2

Alternativ ist es für jedes indexierte Implantat möglich, es mit **nicht-indexierter** Prothetik zu versorgen.

Der Index* auf einen Blick:


- Vier feste Abutmentpositionen bei identischen Konusabmessungen für alle Implantatdurchmesser
- Selbstzentrierendes Federelement am unteren Ende der Prothetikkomponente für präzise und bewegungsfreie Positionierung
- Beschädigungsfreie Verschraubung auch bei hohen Drehmomenten
- Die Abutmentschraube verhindert in finaler Position eine plastische Verformung des Federelements
- Die Kaukräfte werden nicht über den Index übertragen



Federelement



Querschnitt: Implantat / Abutment mit gekennzeichnetem Federelement

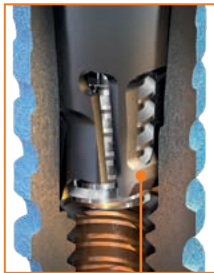

Selbstzentrierende Wirkung durch Feder



Das Gewinde der Abutment-schraube verhindert eine plastische Verformung der Feder nach innen

*zum Patent angemeldet


Möglichkeiten der prothetischen Versorgung

Die unterschiedlichen Abumentreihen ermöglichen eine friktionsbasierte, verschraubte, verklebte oder zementierte Befestigung der Prothetik. Der Schlüssel für eine langfristig zufriedenstellende prothetische Versorgung ist die stabile nahezu bakteriendichte Konusverbindung der Implantate. Ein großer Vorteil der Schnittstelle ist die Tatsache, dass alle Implantate die gleiche Innengeometrie aufweisen, sodass jede Prothetikkomponente – indexiert oder nicht-indexiert – in jedes indexierte Implantat der myplant-Linie passt. Die Implantatwahl erfolgt somit ausschließlich nach dem gegebenen Knochenangebot und wird nicht durch die Prothetik eingeschränkt. Hierdurch werden außerdem Lagerraum und –kosten so gering wie möglich gehalten. Alle Versorgungen von der Einzelkrone über die Brücke zur Teilprothese und der implantatgetragenen Totalprothese sind mit den vielfältigen Aufbauten möglich.

Abutmenttyp	Einzelzahn	Brücke	Teilprothese	Totalprothese
Standard Abutment	✓	✓	✓	✓
Schulterabutment	✓	✓	-	-
Ti-Base	✓	✓	-	-
CEREC Base	✓	-	-	-
OT Equator	-	-	✓	✓
Pre-Face Abutment	✓	✓	-	-

HINWEIS: Ein einzelziges Vorgehen darf mit Implantaten der Länge 6.6 mm nicht durchgeführt werden, da eine ausreichende Verankerung im Knochen nicht gegeben ist. Das Risiko für Implantatverlust ist bei Einzelzahnversorgung mit Implantaten der Länge 6.6 mm sowie bei Freidendbrücken erhöht.

myplant two Aufbauten

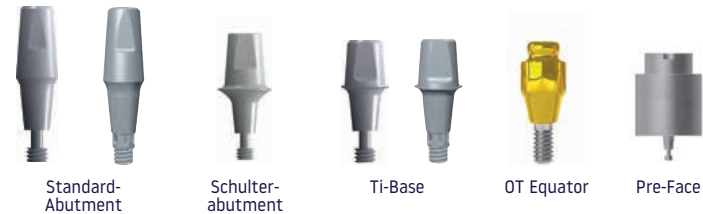

HINWEIS: Die Abutmentschraube ist in allen Abutments integriert.

Produkte - Implantate und Prothetik

Alle Maßangaben in diesem Katalog sind in mm angegeben.
H = Höhe, GH = Gingivahöhe, L = Länge, Ø = Durchmesser

myplant two Implantate

Allen Implantaten liegt eine sterile Verschlusschraube der Höhe 1.0 mm (PVS01) bei.
Alle Implantate verfügen über dieselbe Innenverbindung. Diese ist unabhängig von Implantat-
durchmesser und -länge.

					
	A6.6	A8	A9.5	A11	A14
Ø	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	6.6	8.0	9.5	11.0	14.0
Bestell-Nr.	36A3566MP2000	36A3580MP2000	36A3595MP2000	36A3511MP2000	36A3514MP2000


					
	M6.6	M8	M9.5	M11	M14
Ø	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
L	6.6	8.0	9.5	11.0	14.0
Bestell-Nr.	36M4066MP2000	36M4080MP2000	36M4095MP2000	36M4011MP2000	36M4014MP2000

					
	B6.6	B8	B9.5	B11	B14
Ø	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
L	6.6	8.0	9.5	11.0	14.0
Bestell-Nr.	36B4566MP2000	36B4580MP2000	36B4595MP2000	36B4511MP2000	36B4514MP2000

HINWEIS: Ein einzelntes Vorgehen darf mit Implantaten der Länge 6.6 mm nicht durchgeführt werden, da eine ausreichende Verankerung im Knochen nicht gegeben ist. Das Risiko für Implantat-
verlust ist bei Einzelzahnversorgung mit Implantaten der Länge 6.6 mm sowie bei Freidendbrücken
erhöht.

myplant two Prothetik

Verschlusschrauben

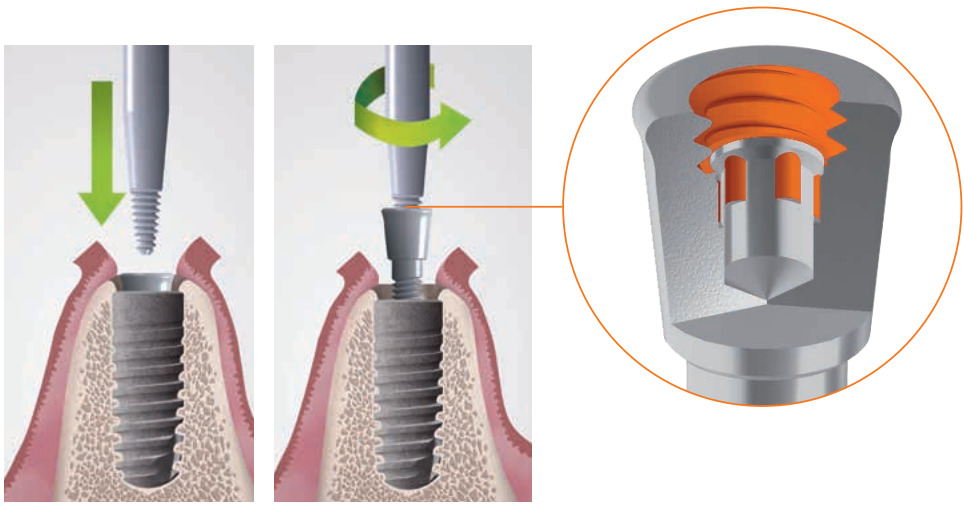

HINWEIS: Die Verschlusschrauben und Gingivaformer lassen sich entgegen der Vorgängervariante
mit Hilfe des Ausdrehorns (ZAD01 / ZAD02) einfach aus dem Implantat entfernen. Hierzu wird der
Ausdrehorn – nach erfolgter subgingivaler Einheilung und Freilegung – linksdrehend in das
Gewinde der Verschlusschraube / des Gingivaformers gedreht, bis sich diese aus dem Implantat löst.

			
Bezeichnung	Verschlusschraube 0.0	Verschlusschraube 1.0	Verschlusschraube 2.0
Bestell-Nr.	36PVS00MP2000	36PVS01MP2000	36PVS02MP2000

Gingivaformer

			
Bezeichnung	Gingivaformer GH 1.5	Gingivaformer GH 3.0	Gingivaformer GH 4.5
Bestell-Nr.	36 PGF15 MP2000	36 PGF30 MP2000	36 PGF45 MP2000

Gingivaformer Schulterabutments

				
Bezeichnung	Gingivaformer Schulterabutment Ø 4.3 GH 1.5	Gingivaformer Schulterabutment Ø 4.3 GH 3.0	Gingivaformer Schulterabutment Ø 5.7 GH 1.5	Gingivaformer Schulterabutment Ø 5.7 GH 3.0
Bestell-Nr.	36 PGF71 MP2000	36 PGF72 MP2000	36 PGF21 MP2000	36 PGF22 MP2000

Abformung

Übertragungspfoften offener Löffel

				
Bezeichnung	Übertragungspfoften S offener Löffel Index	Übertragungspfoften L offener Löffel Index	Übertragungspfoften S offener Löffel	Übertragungspfoften L offener Löffel
Bestell-Nr.	36 XUP01 MP2000	36 XUP02 MP2000	36 PUP01 MP2000	36 PUP02 MP2000

Das Eindrehen der Übertragungspfoften erfolgt von Hand.

Übertragungspfoften geschlossener Löffel

			
Bezeichnung	Repositions-pfoften geschl. Löffel Index	Repositions-pfoften geschl. Löffel	Repositions-pfoften schmal geschl. Löffel
Bestell-Nr.	36 XRP01 MP2000	36 PRP01 MP2000	36 PRP02 MP2000

Das Eindrehen der Repositionspfoften erfolgt von Hand oder mit Hilfe eines Schraubendrehers.

Laborimplantat

	
Bezeichnung	Laborimplantat
Bestell-Nr.	36 PLI01 MP2000

Base Abutments

Scan Base Index

	
Bezeichnung	Scan Base Index
Bestell-Nr.	36 XSBI1 MP2000

DIM Analog

	
Bezeichnung	DIM Analog
Bestell-Nr.	39 XDIM1 MP2000

Standard Abutments

Standard Abutments Index

						
Bezeichnung	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 6.0 Index	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 4.0 Index	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 6.0 Index	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 6.0 Index
Bestell-Nr.	36XAB01MP2000	36XAB02MP2000	36XAB03MP2000	36XAB04MP2000	36XAB05MP2000	36XAB06MP2000

						
Bezeichnung	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 6.0 Index	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 4.0 Index	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 6.0 Index	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 6.0 Index
Bestell-Nr.	36XAB21MP2000	36XAB22MP2000	36XAB23MP2000	36XAB24MP2000	36XAB25MP2000	36XAB26MP2000

						
Bezeichnung	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 6.0 Index	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 4.0 Index	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 6.0 Index	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 6.0 Index
Bestell-Nr.	36XAB51MP2000	36XAB52MP2000	36XAB53MP2000	36XAB54MP2000	36XAB55MP2000	36XAB56MP2000

						
Bezeichnung	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 6.0 Index	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 4.0 Index	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 6.0 Index	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 4.0 Index	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 6.0 Index
Bestell-Nr.	36XAB71MP2000	36XAB72MP2000	36XAB73MP2000	36XAB74MP2000	36XAB75MP2000	36XAB76MP2000

Standard Abutments

						
Bezeichnung	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 4.0	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 6.0	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 4.0	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 6.0	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 4.0	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 6.0
Bestell-Nr.	36PAB01MP2000	36PAB02MP2000	36PAB03MP2000	36PAB04MP2000	36PAB05MP2000	36PAB06MP2000

						
Bezeichnung	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 4.0	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 6.0	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 4.0	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 6.0	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 4.0	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 6.0
Bestell-Nr.	36PAB21MP2000	36PAB22MP2000	36PAB23MP2000	36PAB24MP2000	36PAB25MP2000	36PAB26MP2000

						
Bezeichnung	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 4.0	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 6.0	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 4.0	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 6.0	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 4.0	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 6.0
Bestell-Nr.	36PAB51MP2000	36PAB52MP2000	36PAB53MP2000	36PAB54MP2000	36PAB55MP2000	36PAB56MP2000

						
Bezeichnung	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 4.0	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 6.0	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 4.0	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 6.0	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 4.0	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 6.0
Bestell-Nr.	36PAB71MP2000	36PAB72MP2000	36PAB73MP2000	36PAB74MP2000	36PAB75MP2000	36PAB76MP2000

Hinweis:
Zur zementfrei-
en Befestigung
besitzen sowohl
die geraden als
auch die abgewin-
kelten Abutments
okklusale
Schraubenkanäle.

Hinweis:
Bei ausreichender
Primärstabilität
kann auf den
Standard Abut-
ments mit Hilfe der
Heilungskappen
eine provisorische
Sofortversorgung
stattfinden. Hierzu
ist eine Primärsta-
bilität von ≥35 Ncm
erforderlich!

Hinweis:
Die Abutment-
schraube ist in
allen Abutments
fest integriert.

Zubehör Standard Abutments

Abformkappen für Standard Abutments

		
Bezeichnung	Abformkappe H 4.0	Abformkappe H 6.0
Bestell-Nr.	39 PAK01 MP2000	39 PAK02 MP2000

Heilungskappen für Standard Abutments

		
Bezeichnung	Heilungskappe H 4.0	Heilungskappe H 6.0
Bestell-Nr.	39 PHK01 MP2000	39 PHK02 MP2000

		
Bezeichnung	Heilungskappe H 4.0 rotationsgesichert	Heilungskappe H 6.0 rotationsgesichert
Bestell-Nr.	39 PHK03 MP2000	39 PHK04 MP2000

Hinweis:
Die Heilungskappen dienen der
Herstellung von temporären
Sofortversorgungen. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass sie okklusal
nicht belastet werden.

Laboranalog Standard Abutments

				
Bezeichnung	Laboranalog einteilig 0° H 4.0	Laboranalog einteilig 0° H 6.0	Laboranalog einteilig 7.5° H 4.0	Laboranalog einteilig 7.5° H 6.0
Bestell-Nr.	36 PLA04 MP2000	36 PLA06 MP2000	36 PLA24 MP2000	36 PLA26 MP2000

				
Bezeichnung	Laboranalog einteilig 15° H 4.0	Laboranalog einteilig 15° H 6.0	Laboranalog einteilig 22.5° H 4.0	Laboranalog einteilig 22.5° H 6.0
Bestell-Nr.	36 PLA54 MP2000	36 PLA56 MP2000	36 PLA74 MP2000	36 PLA76 MP2000

Modellierhilfskappen für Standard Abutments

				
Bezeichnung	Modellierhilfskappe H 4.0	Modellierhilfskappe H 6.0	Modellierhilfskappe H 4.0 rotationsgesichert	Modellierhilfskappe H 6.0 rotationsgesichert
Bestell-Nr.	39 PMK01 MP2000	39 PMK02 MP2000	39 PMK03 MP2000	39 PMK04 MP2000

Okklusalschrauben

		
Bezeichnung	Okklusalschraube	Okklusalschraube für Keramik
Bestell-Nr.	36 POS01 MP2000	36 POSK1 MP2000

Abutment Positionierungsschlüssel

	
Bezeichnung	Abutment Positionierungsschlüssel
Bestell-Nr.	39 ZAPS1 MP2000

Revisionshülse

	
Bezeichnung	Revisionshülse
Bestell-Nr.	39 ZRH01 MP2000

Hinweis:
Die Revisionshülse wird auf den
Standard-Aufbau aufgesetzt und
dadurch wird das Eindrehen des
Revisionsinstruments in das Okklusal-
gewinde vereinfacht. Die
Revisionshülse kann alternativ zu
den Parallelisierungspfosten
für die Ausrichtung der Abutments
eingesetzt werden.

Auswahlpfosten

Auswahlpfosten Set (Bestell-Nr. 76**PAP00**MP2000)
enthält die folgenden Artikel:



Auswahlpfosten gerade (ohne Index)

Bezeichnung	Auswahlpfosten 0° GH 1.5 H 4.0	Auswahlpfosten 0° GH 1.5 H 6.0	Auswahlpfosten 0° GH 3.0 H 4.0	Auswahlpfosten 0° GH 3.0 H 6.0
Menge im Set	4	4	4	4
Bestell-Nr.	36 PAP01 MP2000	36 PAP02 MP2000	36 PAP03 MP2000	36 PAP04 MP2000

Bezeichnung	Auswahlpfosten 0° GH 4.5 H 4.0	Auswahlpfosten 0° GH 4.5 H 6.0
Menge im Set	4	4
Bestell-Nr.	36 PAP05 MP2000	36 PAP06 MP2000

Auswahlpfosten abgewinkelt (ohne Index)

Bezeichnung	Auswahlpfosten 15° GH 1.5 H 4.0	Auswahlpfosten 15° GH 1.5 H 6.0	Auswahlpfosten 15° GH 3.0 H 4.0	Auswahlpfosten 15° GH 3.0 H 6.0
Menge im Set	4	4	4	4
Bestell-Nr.	36 PAP51 MP2000	36 PAP52 MP2000	36 PAP53 MP2000	36 PAP54 MP2000

Schulterabutments

Bezeichnung	Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 1.5 H 6.0	Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 3.0 H 6.0	Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 1.5 H 4.0	Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 3.0 H 4.0
Bestell-Nr.	36 PSA01 MP2000	36 PSA02 MP2000	36 PSA05 MP2000	36 PSA06 MP2000

Bezeichnung	Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 1.5 H 6.0	Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 3.0 H 6.0	Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 1.5 H 4.0	Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 3.0 H 4.0
Bestell-Nr.	36 PSA11 MP2000	36 PSA12 MP2000	36 PSA15 MP2000	36 PSA16 MP2000

Bezeichnung	Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 1.5 H 6.0	Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 3.0 H 6.0	Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 1.5 H 4.0	Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 3.0 H 4.0
Bestell-Nr.	36 PSA51 MP2000	36 PSA52 MP2000	36 PSA55 MP2000	36 PSA56 MP2000

Bezeichnung	Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 1.5 H 6.0	Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 3.0 H 6.0	Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 1.5 H 4.0	Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 3.0 H 4.0
Bestell-Nr.	36 PSA61 MP2000	36 PSA62 MP2000	36 PSA65 MP2000	36 PSA66 MP2000

Ti-Base

Ti-Base Index

			
Bezeichnung	Ti-Base 0° GH 0.75 H 6.0 Index	Ti-Base 0° GH 1.5 H 6.0 Index	Ti-Base 0° GH 3.0 H 6.0 Index
Bestell-Nr.	36XTB01MP2000	36XTB02MP2000	36XTB03MP2000

			
Bezeichnung	Ti-Base 0° GH 0.75 H 4.0 Index	Ti-Base 0° GH 1.5 H 4.0 Index	Base 0° GH 3.0 H 4.0 Index
Bestell-Nr.	36XTB04MP2000	36XTB05MP2000	36XTB06MP2000

Ti-Base

			
Bezeichnung	Ti-Base 0° GH 0.75 H 6.0	Ti-Base 0° GH 1.5 H 6.0	Ti-Base 0° GH 3.0 H 6.0
Bestell-Nr.	36PTB01MP2000	36PTB02MP2000	36PTB03MP2000

			
Bezeichnung	Ti-Base 0° GH 0.75 H 4.0	Ti-Base 0° GH 1.5 H 4.0	Ti-Base 0° GH 3.0 H 4.0
Bestell-Nr.	36PTB04MP2000	36PTB05MP2000	36PTB06MP2000

CEREC* Base

CEREC* Base Index

			
Bezeichnung	CEREC Base GH 0.75 Index	CEREC Base GH 1.5 Index	CEREC Base GH 3.0 Index
Bestell-Nr.	36XTBC1MP2000	36XTBC2MP2000	36XTBC3MP2000

* CEREC ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona, Inc.

Pre-Face Abutments

Pre-Face Abutments Index

		
Bezeichnung	Pre-Face Abutment Ø 11.5 Index	Pre-Face Abutment Ø 16.0 Index
Bestell-Nr.	36XPMB3MP2000	36XPMB4MP2000

Pre-Face Abutments

		
Bezeichnung	Pre-Face Abutment Ø 11.5	Pre-Face Abutment Ø 16.0
Bestell-Nr.	36PPMB3MP2000	36PPMB4MP2000

Revisionsinstrumente

			
Bezeichnung	Ausstoßinstrument manuell	Ausstoßinstrument maschinell, kurz	Ausstoßinstrument maschinell, lang
Bestell-Nr.	39ZAI01MP2000	39ZAI51MP2000	39ZAI52MP2000

	
Bezeichnung	Revisionshülse
Bestell-Nr.	39ZRH01MP2000


Revision des Abutments

Der selbsthemmende Konus ermöglicht eine rotationsstabile Verbindung von Implantat und Abutment, die nahezu bakteriendicht abschließt. Diese Verbindung lässt sich mit Hilfe des Revisionsinstrumentes wieder lösen.

Zunächst wird der Schraubendreher (ZSD0L) in den seitlichen Schraubenkanal eingeführt und die Schraube vollständig gelöst. Die Revisionshülse (ZRH01) wird nun über das Abutment aufgesetzt.

Das Ausstoßinstrument (ZAI51 oder ZAI52) wird in der Bohrung der Revisionshülse rechtsdrehend eingeführt, bis sich das Abutment aus dem Implantatkonus löst. Die Revisionshülse ist für das Lösen aller Standard Abutments, Ti-Bases und Schulterabutments (Ø 4.3 mm) geeignet. Die Revisionshülse kann alternativ zu den Parallelisierungspfosten für die Ausrichtung der Abutments eingesetzt werden.

HINWEIS: Wird die Abutmentschraube nicht vollständig gelöst, kann es zu einer Blockierung des Ausstoßinstruments kommen. In diesem Fall sind das Instrument und die Hülse zu entfernen und die Abutmentschraube vollständig zu lösen.

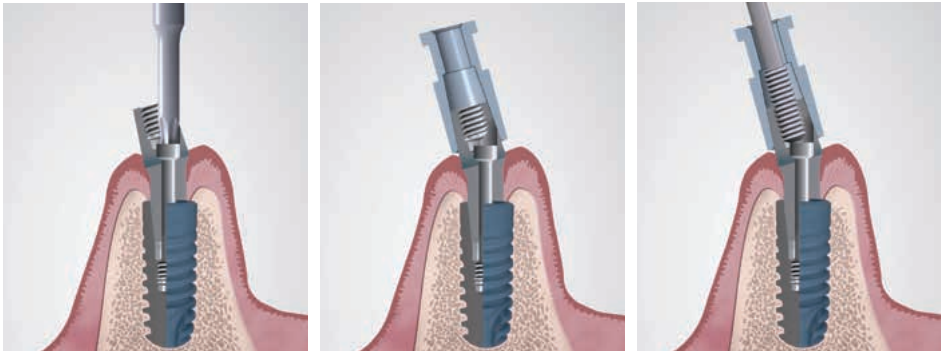

WICHTIG: Um ein Verkleben zu vermeiden, ist bei abgewinkelten Abutments unbedingt darauf zu achten, dass das Revisionsinstrument in den Schraubenkanal der Okklusalschraube eingedreht wird.

OT Equator

OT Equator Abutments

				
Bezeichnung	OT Equator GH 1.5	OT Equator GH 3.0	OT Equator GH 4.5	OT Equator GH 6.0
Bestell-Nr.	36 POT01 MP2000	36 POT02 MP2000	36 POT03 MP2000	36 POT04 MP2000

OT Equator Sets
(beinhaltet OT Equator und Caps Assortment Kit)

				
Bezeichnung	OT Equator Set GH 1.5	OT Equator Set GH 3.0	OT Equator Set GH 4.5	OT Equator Set GH 6.0
Bestell-Nr.	39 POTC2 MP2000	39 POTC3 MP2000	39 POTC4 MP2000	39 POTC5 MP2000

OT Equator Kits

	
Bezeichnung	Bezeichnung
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Caps Assortment Kit korrigiert Implantatdivergenzen bis zu 30° 39 POTC1 MP2000	Smart Box Equator Kit korrigiert Implantatdivergenzen bis zu 50° 39 POTK1 MP2000

 RHEIN83, Via E. Zago, 10/ABC, 40128 (Bologna) Italy (für alle Artikel der Seiten 28 und 29)

Übersicht Retentionseinsätze und Abzugsgewichte

				
Bezeichnung	OT Equator Gelbe Kappe	OT Equator Pinke Kappe	OT Equator Klare Kappe	OT Equator Violette Kappe
Abzugsgewicht gemäß Farbcodierung	extra weiche Retention - 600 g	weiche Retention - 1200 g	Standard-Retention - 1800 g	starke Retention - 2700 g
Menge im Set	1	1	1	1

OT Equator Zubehör

					
Bezeichnung	Laboranalog	Übertragungskappe	Vierkantschlüssel für manuelle Insertion	Einsatz- und Aushebeinstrument für Retentionseinsätze	Vierkantschlüssel mit RA-Schaft
Bestell-Nr.	39 POTA1 MP2000	39 POTT1 MP2000	39 ZOT01 MP2000	39 ZOT02 MP2000	39 ZOT03 MP2000


Chirurgische Instrumente

Apikale Überlängen

Bei der Aufbereitung des Implantatbetts ist zu berücksichtigen, dass die effektive Bohrtiefe um 0.4 - 0.7 mm nach apikal variiert und je nach Durchmesser des Implantatbohrers tiefer liegt als die angestrebte Implantatlänge. Diese zusätzliche Länge muss bereits während der Planungsphase mit berücksichtigt werden.

	Tri-Spade Bohrer A		Tri-Spade Bohrer M		Tri-Spade Bohrer B	
Durchmesser	Ø 2.4 mm	Ø 2.9 mm	Ø 2.9 mm	Ø 3.3 mm	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm
Apikale Überlänge	0.4 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.7 mm

Apikale Überlängen am Beispiel

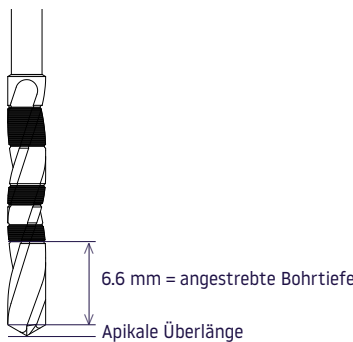


Erläuterung der Lasermarkierungen


Spiralbohrer



Tri-Spade Bohrer

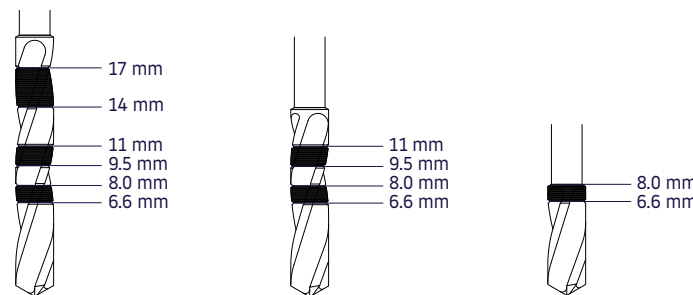


Konischer Ausreiber

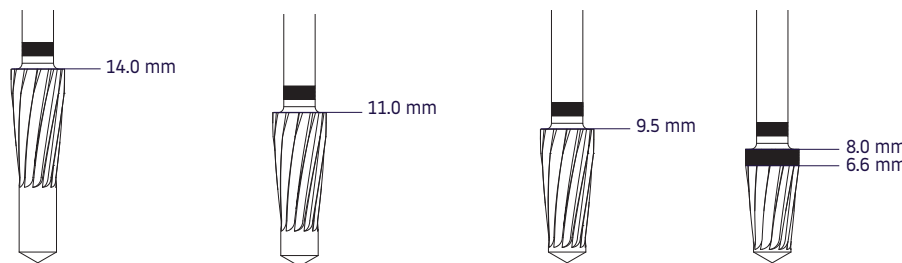

Kortikalissenker




Gewindeschneider

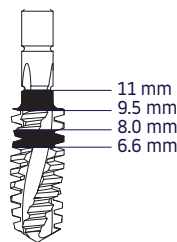

Allgemeine Instrumente



Bezeichnung	Rosenbohrer	Initialbohrer, kurz	Initialbohrer, lang	Richtungslehre
Bestell-Nr.	390RB01MP2000	390IB01MP2000	390IB02MP2000	390RL01MP2000

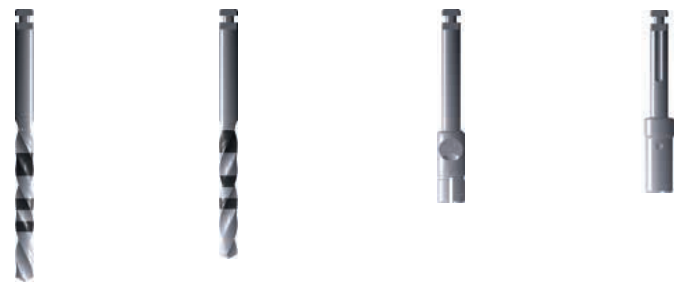

Bezeichnung	Spiralbohrer, lang	Spiralbohrer, kurz	Bohrerverlängerung	HT Bohrerverlängerung
Bestell-Nr.	390SB01MP2000	390SB02MP2000	39ZBV01MP2000	39ZBV02MP2000

Tri-Spade Bohrer



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 XS	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 S	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 M	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.9 S	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.9 M
Bestell-Nr.	39ATS01MP2000	39ATS02MP2000	39ATS03MP2000	39ATS12MP2000	39ATS13MP2000



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 XS	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 S	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 M	Tri-Spade Bohrer M Ø 3.3 S	Tri-Spade Bohrer M Ø 3.3 M
Bestell-Nr.	39MTS01MP2000	39MTS02MP2000	39MTS03MP2000	39MTS12MP2000	39MTS13MP2000



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 XS	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 S	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 M	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.8 S	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.8 M
Bestell-Nr.	39BTS01MP2000	39BTS02MP2000	39BTS03MP2000	39BTS12MP2000	39BTS13MP2000

Konische Ausreiber



Bezeichnung	Konischer Ausreiber A 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber A 9.5	Konischer Ausreiber A 11.0	Konischer Ausreiber A 14.0
Bestell-Nr.	39 AKA01 MP2000	39 AKA02 MP2000	39 AKA03 MP2000	39 AKA04 MP2000



Bezeichnung	Konischer Ausreiber M 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber M 9.5	Konischer Ausreiber M 11.0	Konischer Ausreiber M 14.0
Bestell-Nr.	39 MKA01 MP2000	39 MKA02 MP2000	39 MKA03 MP2000	39 MKA04 MP2000



Bezeichnung	Konischer Ausreiber B 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber B 9.5	Konischer Ausreiber B 11.0	Konischer Ausreiber B 14.0
Bestell-Nr.	39 BKA01 MP2000	39 BKA02 MP2000	39 BKA03 MP2000	39 BKA04 MP2000

Kortikalissenker



Bezeichnung	Kortikalissenker A	Kortikalissenker M	Kortikalissenker B
Bestell-Nr.	39 AKS01 MP2000	39 MKS01 MP2000	39 BKS01 MP2000

Hinweis:
Der Kortikalissenker ist ein je
nach Knochenqualität optional
anzuwendendes Instrument.

Gewindeschneider



Bezeichnung	Gewindeschneider A Ø 3.5	Gewindeschneider M Ø 4.0	Gewindeschneider B Ø 4.5
Bestell-Nr.	39 AGS01 MP2000	39 MGS04 MP2000	39 BGS02 MP2000

Zubehör und Sortimente

Drehmomentratschen

				
Bezeichnung	Ratsche	Drehmomentaufsatz	Drehmomentratsche	Biegestab-Drehmomentratsche
Bestell-Nr.	39ZRA01MP2000	39ZDMA1MP2000	39ZRA02MP2000	39ZRA03MP2000

Werkzeuge

				
Bezeichnung	Gabelschlüssel	Hülsenschlüssel	High Torque Adapter S	High Torque Adapter M
Bestell-Nr.	39ZGS01MP2000	39ZHS01MP2000	39ZHT0SMP2000	39ZHT0MP2000

				
Bezeichnung	Schraubendreher S	Schraubendreher L	Schraubendreher einteilig L	Schraubendreher einteilig XS
Bestell-Nr.	39 ZSD0 SMP2000	39 ZSD0 LMP2000	39 ZSD1 SMP2000	39 ZSDX SMP2000

		
Bezeichnung	Bohrerverlängerung	HT Bohrerverlängerung
Bestell-Nr.	39ZBV01MP2000	39ZBV02MP2000

Hinweis:
Der Eindrehhandgriff XL bietet im Front- und Seitenzahnbereich die Möglichkeit zur manuellen Präparation des Implantatlagere. Ebenso kann das Implantat damit manuell inseriert werden. Zudem ist die Manipulation mit der Ratsche möglich. Auch kann das Instrument zur Unterstützung beim internen Sinuslift in Kombination mit einem konischen Ausreiber und einem Hammer eingesetzt werden.

Hinweis:
Vor jeder Anwendung der Eindrehinstrumente ist der O-Ring zu prüfen. Bei Beschädigungen oder Verschleiß ist dieser auszutauschen. Es besteht das Risiko, dass kein ausreichender Halt zwischen Eindrehinstrument und Implantat entsteht.



		
Bezeichnung	Eindrehhandgriff XL	
Bestell-Nr.	39 ZEHXL MP2000	
		
		
Bezeichnung	Eindrehinstrument S	Eindrehinstrument L
Bestell-Nr.	39 ZEI01 MP2000*	39 ZEI02 MP2000*
		
Bezeichnung verpackt à	O-Ring Eindrehinstrument 10	
Bestell-Nr.	82 ZEI0R MP2000	

								
Bezeichnung	Ausstoßinstrument manuell		Ausstoßinstrument maschinell, kurz		Ausstoßinstrument maschinell, lang		Revisionshülse	
Bestell-Nr.	39ZAI01MP2000		39ZAI51MP2000		39ZAI52MP2000		39ZRH01MP2000	
								
Bezeichnung	Rückdrehinstrument							
Bestell-Nr.	39ZRD1MP2000							
								
Bezeichnung	Ausdrehhorn, kurz				Ausdrehhorn, lang			
Bestell-Nr.	39ZAD01MP2000*				39ZAD02MP2000*			
								
Bezeichnung	Handrad für Ratscheneinsatz				Handrad für Schraubendreher			Haltegriff Labor
Bestell-Nr.	39ZHR01MP2000				39ZHR02MP2000			39ZHG01MP2000

Hinweis:
Der selbsthemmende Konus ermöglicht eine rotationsstabile Verbindung zum Implantat, die nahezu bakteriendicht abschließt. Diese Verbindung lässt sich mit Hilfe des Ausstoßinstrumentes wieder lösen.

Chirurgie Kassette myplant

Bestell-Nr. 760CK02MP2000



Alle Instrumente zur chirurgischen Implantatbettaufbereitung für myplant two sind in der Chirurgie Kassette myplant erhältlich. Diese erlaubt eine besonders strukturierte und anwenderfreundliche Aufbewahrung und erleichtert durch die farbliche Kennzeichnung der Instrumente die Anwendung während der Implantation.

Die Kassette enthält die folgenden Artikel:

			
Bezeichnung	Eindrehinstrument S	Eindrehinstrument L	Hülsenschlüssel
Menge im Set	1	1	1
Bestell-Nr.	39ZEI01MP2000*	39ZEI02MP2000*	39ZHS01MP2000



					
Bezeichnung	Schraubendreher S	Schraubendreher L	Schraubendreher einteilig L	Schraubendreher einteilig XS	
Menge im Set	1	1	1	1	
Bestell-Nr.	39ZSD0SMP2000	39ZSD0LMP2000	39ZSD1SMP2000	39ZSDXSMP2000	
					
Bezeichnung	High Torque Adapter M	High Torque Adapter S	Bohrerverlängerung	HT Bohrerverlängerung	
Menge im Set	1	1	1	1	
Bestell-Nr.	39ZHT0MP2000	39ZHT0SMP2000	39ZBV01MP2000	39ZBV02MP2000	
					
Bezeichnung	Rückdrehinstrument	Handrad für Ratscheneinsatz	Biegestab-Drehmomentratsche	Gabelschlüssel	
Menge im Set	1	1	1	1	
Bestell-Nr.	39ZRD1MP2000	39ZHR01MP2000	39ZRA03MP2000	39ZGS01MP2000	
					
Bezeichnung	Rosenbohrer	Initialbohrer, kurz	Spiralbohrer, lang	Spiralbohrer, kurz	Richtungslehre
Menge im Set	1	1	1	1	2
Bestell-Nr.	39ORB01MP2000	39OIB01MP2000	39OSB01MP2000	39OSB02MP2000	39ORL01MP2000



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 M	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.9 M	Konischer Ausreiber A 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber A 9.5	Konischer Ausreiber A 11.0	Konischer Ausreiber A 14.0
Menge im Set	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 ATS03 MP2000	39 ATS13 MP2000	39 AKA01 MP2000	39 AKA02 MP2000	39 AKA03 MP2000	39 AKA04 MP2000



Bezeichnung	Kortikalissenker A	Gewindeschneider A
Menge im Set	1	1
Bestell-Nr.	39 AKS01 MP2000	39 AGS01 MP2000



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 M	Tri-Spade Bohrer M Ø 3.3 M	Konischer Ausreiber M 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber M 9.5	Konischer Ausreiber M 11.0	Konischer Ausreiber M 14.0
Menge im Set	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 MTS03 MP2000	39 MTS13 MP2000	39 MKA01 MP2000	39 MKA02 MP2000	39 MKA03 MP2000	39 MKA04 MP2000



Bezeichnung	Kortikalissenker M	Gewindeschneider M
Menge im Set	1	1
Bestell-Nr.	39 MKS01 MP2000	39 MGs04 MP2000



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 M	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.8 M	Konischer Ausreiber B 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber B 9.5	Konischer Ausreiber B 11.0	Konischer Ausreiber B 14.0
Menge im Set	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 BTS03 MP2000	39 BTS13 MP2000	39 BKA01 MP2000	39 BKA02 MP2000	39 BKA03 MP2000	39 BKA04 MP2000



Bezeichnung	Kortikalissenker B	Gewindeschneider B
Menge im Set	1	1
Bestell-Nr.	39 BKS01 MP2000	39 BGS02 MP2000

Chirurgie Kassette 4.0

Bestell-Nr. 76**CKB40**MP2000



enthält die folgenden Artikel:



Bezeichnung	Eindrehinstrument S	Schraubendreher S	Rückdrehinstrument
Menge im Set	1	1	1
Bestell-Nr.	39 ZEI01 MP2000*	39 ZSD05 MP2000*	39 ZRD11 MP2000



Bezeichnung	High Torque Adapter M	Bohrerverlängerung	Initialbohrer, kurz	Spiralbohrer, lang	Gabelschlüssel
Menge im Set	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 ZHT0M MP2000	39 ZBV01 MP2000	39 0IB01 MP2000	39 0SB01 MP2000	39 ZGS01 MP2000



Bezeichnung	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 XS	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 M	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 XS	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 M
Menge im Set	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 ATS01 MP2000	39 ATS03 MP2000	39 MTS01 MP2000	39 MTS03 MP2000



Bezeichnung	Konischer Ausreiber M 6.6 / 8.0	Konischer Ausreiber M 9.5	Konischer Ausreiber M 11.0	Konischer Ausreiber M 14.0	Gewindeschneider M
Menge im Set	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 MKA01 MP2000	39 MKA02 MP2000	39 MKA03 MP2000	39 MKA04 MP2000	39 MGS04 MP2000

Prothetiksortimente

Prothetikbox

Bestell-Nr. 76**PPB03**MP2000



enthält die folgenden Artikel:



Bezeichnung	Drehmomentratsche	Schraubendreher S	Schraubendreher L	Ausdrehdorn, kurz	Ausdrehdorn, lang
Menge im Set	1	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 ZRA02 MP2000	39 ZSD0S MP2000	39 ZSD0L MP2000	39 ZAD01 MP2000*	39 ZAD02 MP2000*



Bezeichnung	High Torque Adapter S	Handrad für Schraubendreher	Ausstoßinstrument maschinell, kurz	Ausstoßinstrument maschinell, lang	Revisionshülse
Menge im Set	1	1	1	1	2
Bestell-Nr.	39 ZHT0S MP2000	39 ZHR02 MP2000	39 ZAI51 MP2000	39 ZAI52 MP2000	39 ZRH01 MP2000



Laborbox

Bestell-Nr. 76**PLB01**MP2000



enthält die folgenden Artikel:



Bezeichnung	High Torque Adapter M	Schraubendreher S	Schraubendreher L	Handrad für Ratscheneinsatz
Menge im Set	1	1	1	1
Bestell-Nr.	39 ZHT0M MP2000	39 ZSD0S MP2000	39 ZSD0L MP2000	39 ZHR01 MP2000

Weitere Informationen

Bestellnummer

Für die Identifikation eines Artikels reicht die Nennung des fett abgedruckten Abschnittes aus.

	
	A8
Ø	3.5
L	8.0
Bestell-Nr.	36 A3580 MP2000

Beispiel

Artikelnummer: 36**A3580**MP2000

Zu nennender Abschnitt: **A3580**







Das myplant Instrumentarium

Unter Berücksichtigung der anatomischen und räumlichen Gegebenheiten sollte individuell für jeden Patienten die passende Position und Anzahl der Implantate sowie ein passender Implantatdurchmesser und eine geeignete Implantatlänge ausgewählt werden.

Für eine erhöhte, primäre Stabilität (enhanced primary stability, EPS), wurde eine systematische Operationstechnik zur Aufbereitung des Implantatbetts entwickelt. Das Implantatbett kann angepasst an die gegebene Knochenqualität in drei Stufen aufbereitet werden. Dies führt schrittweise zu einer Optimierung der Primärstabilität.

Ist eine reguläre Primärstabilität (regular primary stability, RPS), gewünscht oder liegen sehr harte Knochenqualitäten vor, kann auf die RPS Tri-Spade Bohrer zurückgegriffen werden.

Schnellübersicht chirurgisches Vorgehen

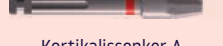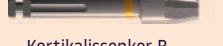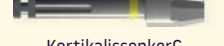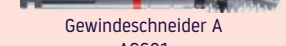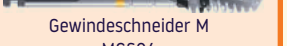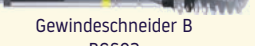	Ø 3.5mm	Ø 4.0mm	Ø 4.5mm
Glättung des Kieferkammes		 Rosenbohrer ORB01	
Initialbohrung		 Initialbohrer OIB01 OIB02	
Markierung der Implantatachse Ø 2.0 mm		 Spiralbohrer OSB01 OSB02	
EPS (Enhanced Primary Stability) 1. Erweiterung des Implantatbetts Ø 2.4 mm für A, M & B Implantate		 Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 ATS01 ATS02 ATS03	
RPS (Regular Primary Stability) 1. Erweiterung des Implantatbetts Ø 2,9 mm für A, M & B Implantate		 Tri-Spade Bohrer A Ø 2.9 ATS12 ATS13	
EPS (Enhanced Primary Stability) 2. Erweiterung des Implantatbetts Ø 2.9 mm für M & B Implantate		 Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 MTS01 MTS02 MTS03	
RPS (Regular Primary Stability) 2. Erweiterung des Implantatbetts Ø 3,3 mm für M & B Implantate		 Tri-Spade Bohrer M Ø 3.3 MTS12 MTS13	
EPS (Enhanced Primary Stability) 3. Erweiterung des Implantatbetts Ø 3.3 mm für B Implantate			 Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 BTS01 BTS02 BTS03
RPS (Regular Primary Stability) 3. Erweiterung des Implantatbetts Ø 3,8 mm für B Implantate			 Tri-Spade Bohrer B Ø 3.8 BTS12 BTS13
Konische Erweiterung des Implantatbetts	 Konischer Ausreiber A AKA01 / AKA02 / AKA03 / AKA04	 Konischer Ausreiber M MKA01 / MKA02 / MKA03 / MKA04	 Konischer Ausreiber B BKA01 / BKA02 / BKA03 / BKA04
Optional: Konische Erweiterung des Implantatbetts bei fehlender Spongiosa	 Kortikalissenker A AKS01	 Kortikalissenker B MKS01	 Kortikalissenker C BKS01
Vorschneiden des Implantatgewindes*	 Gewindeschneider A AGS01	 Gewindeschneider M MGS04	 Gewindeschneider B BGS02
Implantatinserterion	 Implantat A A3566 / A3580 / A3595 / A3511 / A3514	 Implantat M M4066 / M4080 / M4095 / M4011 / M4014	 Implantat B B4566 / B4580 / B4595 / B4511 / B4514

*bei weichem Knochen nicht empfohlen.

Empfohlene Drehmomente für die Prothetik

	Produkt	Drehmoment
	Verschlusschrauben	handfest (5-7 Ncm)
	Gingivaformer	
	Übertragungspfeifen	
	Repositionsstift	
	Scan Base	
	Schraube für Scan Base	
	Okklusalschraube	10 Ncm
	Okklusalschraube für Keramik	
	Standard Abutment	15 Ncm
	Ti-Base	
	Schulterabutment	
	Pre-Face Abutment	
	OT Equator	25 Ncm

Hinweis: Die Abbildungen sind beispielhaft. Die Drehmomentangaben sind für alle Varianten der genannten Produkte gültig.

Materialübersicht

Unlegiertes Titan Grade 4

Titan Grade 4 wird für Implantate (myplant two), Verschlusschrauben, Gingivaformer und weitere Sekundärteile verwendet.

Technische Hinweise
Der Werkstoff Titan Grade 4 entspricht grundsätzlich den Normen ISO 5832-2 und ASTM F67.

Titanlegierung Grade 5-ELI / Grade 23

Titanlegierung Grade 5-ELI / Grade 23 wird für Implantate (myplant bio) und Sekundärteile verwendet.

Technische Hinweise
Der Werkstoff Titanlegierung Grade 5-ELI entspricht grundsätzlich den Normen ISO 5832-3 und ASTM F136.

Edelstahl, rostfrei 1.4197

Edelstahl, rostfrei 1.4197 wird für Instrumente zur Implantatbettaufrbereitung verwendet.

Technische Hinweise
Der Werkstoff rostfreier Stahl 1.4197 entspricht grundsätzlich den Normen ISO 13504 und ASTM F899.

TECAPEEK MT CLASSIX white

PEEK wird für für Heilungs- und Abformkappen verwendet.



Enthält gefährliche Substanzen: Cobalt, CAS: 7440-48-4

Dieses Produkt enthält Cobalt in mehr als 0,1 Masseprozent und ist damit, gemäß aktuellen Regularien, kennzeichnungspflichtig als CMR Stoff Klasse 1B (krebserzeugend, erbgutverändernd und/oder fortpflanzungsgefährdend (en: carcinogenic, mutagenic, reprotoxic)). Es wurde nachgewiesen, dass bei zweckbestimmter Anwendung kein erhöhtes Krebsrisiko oder nachteilige Auswirkungen in Hinblick auf Fortpflanzung oder Erbgutveränderung entstehen.

Allgemeine Hinweise

Abhängig von behördlichen Zulassungen sind unter Umständen nicht alle angebotenen Produkte oder Dienstleistungen weltweit erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebspartner der myplant GmbH.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Bilder und Darstellungen exemplarisch sind. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und / oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb Änderungen vor.

© 2025 by Hager & Meisinger GmbH, Neuss. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der fotomechanischen Wiedergabe und insbesondere das der Übersetzung.

myplant-Garantie

Die myplant-Garantie beinhaltet eine lebenslange Gewährleistung auf alle Implantate Ihres Produktportfolios. Diese greift bei Herstellungs- und Materialfehlern sowie bei nicht osseointegrierten Implantaten. Kostenloser Implantat-Ersatz wird vom Hersteller, der Hager & Meisinger GmbH gestellt ohne weitere Zusatzkosten.

Ausschlusskriterien

Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen, lehnt die Hager & Meisinger GmbH jegliche Art von Gewährleistung und Haftungsansprüchen ab.

Die Verantwortung obliegt ausschließlich dem Anwender und Behandler.

Weitere Ausschlusskriterien

Weitere Ausschlusskriterien sind der Implantatverlust durch äußere Fremdeinwirkungen (Unfälle, Traumata, Falschbehandlung, etc.) sowie der Implantatverlust durch Nichtbeachtung der Kontraindikationen (Einnahme von Medikamenten, Drogen- und Alkoholmissbrauch, Tabakkonsum, körperliche Erkrankungen). Genauere Angaben sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Weitergehende Ansprüche und Folgeschäden wie z. B. Laborkosten und klinische Folgebehandlungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Richtlinien

Alle myplant Artikel sind gemäß der vom Hersteller bereitgestellten Gebrauchsanweisung zu verwenden. Die Verwendung von systemfremden Komponenten sowie jegliche Art der Modifikation kann die Funktion der myplant Implantatsysteme beeinträchtigen und schließt jede Garantie oder Ersatzleistung durch die Hager & Meisinger GmbH aus. Dies gilt insbesondere bei nicht empfohlenen Anwendungsverfahren. Systemfehler durch Verwechslung von Werkzeugen und Implantaten sind zu minimieren. Daher ist auf Farbcodierungen und / oder Beschriftungen zu achten. Die Verarbeitung und Anwendung der myplant Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrolle und obliegt einzig der Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung für hierbei verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Die anwendungstechnische Beratung über unsere Produkte erfolgt mündlich, schriftlich, mittels elektronischer Medien oder über Demonstrationen. Grundlage ist der Stand von Wissenschaft und Technik, wie er uns zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens bekannt ist. Sie entbindet den Anwender nicht von der Pflicht der persönlichen Prüfung des Produktes auf dessen indikationsbezogene Eignung und der Weiterbildung auf dem Gebiet der dentoalveolären Chirurgie / Implantologie.

Verfügbarkeit

Einige der in diesem Dokument aufgeführten myplant Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

5. Informationen zum Vorfall

Wie war die Hygiene um das Implantat?

☐ Sehr gut

☐ Gut

☐ Mittel

☐ Schlecht

War einer oder mehrere dieser Faktoren am Vorfall beteiligt?

☐ Biomechanische Überlastung

☐ Knochenresorption

☐ Implantatbruch

☐ Infektion

☐ Vorherige Knochenaugmentation

☐ Ungenügende Knochenqualität

☐ Sinusperforation

☐ Bruxismus

☐ Nervenkompression

☐ Überhitzung des Knochens

☐ Sofortimplantation

☐ Periimplantitis

☐ Trauma oder Unfall

☐ Angrenzender endodontisch versorgter Zahn

☐ Sonstiges:

Folgendes wurde beim Implantatverlust festgestellt

☐ Asymptomatisch

☐ Schmerzen

☐ Abszess

☐ Taubheit

☐ Blutung

☐ Erhöhte Sensibilität

☐ Instabilität

☐ Fistel

☐ Schwellung

☐ Entzündung

☐ Überempfindlichkeit

Wurde das Implantat bereits prothetisch versorgt?

☐ Nein

☐ Ja (bitte Punkt 6 ausfüllen)

Warum kam es Ihrer Meinung nach zum Implantatverlust?

6. Informationen zur Prothetik

Art der Restauration

☐ Krone

☐ Brücke

☐ Teilprothese (oben)

☐ Teilprothese (unten)

☐ Vollprothese (oben)

☐ Vollprothese(unten)

☐ Sonstige:

REF Nr. Prothetik:

LOT Nr. Prothetik:

Datum der provisorischen Versorgung

T

T

M

M

J

J

Datum der Entfernung

T

T

M

M

J

J

Datum der endgültigen Versorgung

T

T

M

M

J

J

Wurde ein Drehmomentaufsatz verwendet?

☐ Ja

Ncm

☐ Nein

☐ Nicht bekannt

Wurden Kontrolluntersuchungen durchgeführt?

☐ Ja

☐ Nein

Fallbeschreibung:

7. Informationen bei Schraubenbruch *

REF Nr. Aufbau:

LOT Nr. Aufbau:

Schraubenbruch am:

T

T

M

M

J

J

Schraubenrest entfernt am:

T

T

M

M

J

J

Wurde ein Drehmomentaufsatz verwendet?

☐ Ja

Ncm

☐ Nein

☐ Nicht bekannt

Art der Restauration:

Fallbeschreibung:

8. Instrumente

Ungefähre Anzahl der Anwendungen

☐ Erstmals

☐ 2-5

☐ 6-10

☐ >10

Art der Reinigung

☐ Manuell

☐ Ultraschall

☐ Thermodesinfektor

Art der Sterilisation

☐ Autoklavierung

☐ Trockenhitze

☐ Chemieklavierung

Welches Reinigungsmittel wurde eingesetzt:

9. Bestätigung *

Alle Produkte, welche zurückgesendet werden, sind zu autoklavieren und als "steril" zu kennzeichnen.
Ergänzen Sie bitte alle notwendigen Angaben der zu reklamierenden Produkte in diesem Garantief formular unter Beachtung der Garantiebedingungen der Hager & Meisinger GmbH und senden Sie dieses Formular, inkl. der autoklavierten Produkte und evtl. Röntgenbilder an die Hager & Meisinger GmbH zurück. Zur Rücksendung bitte eine gepolsterte Versandtasche verwenden - bei Verlust einzelner Gegenstände während des Versandes erlischt die Garantie.

Datum:

Unterschrift des Arztes:

Meisinger

1880

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de • www.meisinger.de

Index

Alle Maßangaben sind in mm angegeben.
H = Höhe, GH = Gingivahöhe, L = Länge, Ø = Durchmesser

	Bestell.-Nr.	Bezeichnung	Seite		
PRODUKTE	IMPLANTATE				
	A3566	myplant two Implantat Ø 3.5 L 6.6 (A6.6)	14		
	A3580	myplant two Implantat Ø 3.5 L 8.0 (A8)	14		
	A3595	myplant two Implantat Ø 3.5 L 9.5 (A9.5)	14		
	A3511	myplant two Implantat Ø 3.5 L 11.0 (A11)	14		
	A3514	myplant two Implantat Ø 3.5 L 14.0 (A14)	14		
	M4066	myplant two Implantat Ø 4.0 L 6.6 (M6.6)	14		
	M4080	myplant two Implantat Ø 4.0 L 8.0 (M8)	14		
	M4095	myplant two Implantat Ø 4.0 L 9.5 (M9.5)	14		
	M4011	myplant two Implantat Ø 4.0 L 11.0 (M11)	14		
	M4014	myplant two Implantat Ø 4.0 L 14.0 (M14)	14		
	B4566	myplant two Implantat Ø 4.5 L 6.6 (B6.6)	14		
	B4580	myplant two Implantat Ø 4.5 L 8.0 (B8)	14		
	B4595	myplant two Implantat Ø 4.5 L 9.5 (B9.5)	14		
	B4511	myplant two Implantat Ø 4.5 L 11.0 (B11)	14		
	B4514	myplant two Implantat Ø 4.5 L 14.0 (B14)	14		
	VERSCHLUSSSCHRAUBEN				
	PVS00	Verschlussschraube H 0.0	15		
	PVS01	Verschlussschraube H 1.0	15		
	PVS02	Verschlussschraube H 2.0	15		
	GINGIVAFORMER				
	PGF15	Gingivaformer Ø 4.2 GH 1.5	16		
	PGF30	Gingivaformer Ø 4.2 GH 3.0	16		
	PGF45	Gingivaformer Ø 4.2 GH 4.5	16		
	GINGIVAFORMER SCHULTERABUTMENT				
PGF71	Gingivaformer Schulterabutment Ø 4.3 GH 1.5	16			
PGF72	Gingivaformer Schulterabutment Ø 4.3 GH 3.0	16			
PGF21	Gingivaformer Schulterabutment Ø 5.7 GH 1.5	16			
PGF22	Gingivaformer Schulterabutment Ø 5.7 GH 3.0	16			
ABFORMUNG					
XUP01	Übertragungspfosten S offener Löffel Index	17			
XUP02	Übertragungspfosten L offener Löffel Index	17			
PUP01	Übertragungspfosten S offener Löffel	17			
PUP02	Übertragungspfosten L offener Löffel	17			
XRP01	Repositionspfosten geschl. Löffel Index	17			
PRP01	Repositionspfosten geschl. Löffel	17			
PRP02	Repositionspfosten schmal geschl. Löffel	17			
PLI01	Laborimplantat	17			

WEITERE INFORMATIONEN

57

Bestell.-Nr.		Bezeichnung		Seite	
BASE ABUTMENTS					
XSB11	Scan Base Index	17			
XDIM1	DIM Analog	17			
STANDARD ABUTMENTS INDEX					
XAB01	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 4.0 Index	18			
XAB02	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 6.0 Index	18			
XAB03	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 4.0 Index	18			
XAB04	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 6.0 Index	18			
XAB05	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 4.0 Index	18			
XAB06	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 6.0 Index	18			
XAB21	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 4.0 Index	18			
XAB22	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 6.0 Index	18			
XAB23	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 4.0 Index	18			
XAB24	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 6.0 Index	18			
XAB25	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 4.0 Index	18			
XAB26	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 6.0 Index	18			
XAB51	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 4.0 Index	18			
XAB52	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 6.0 Index	18			
XAB53	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 4.0 Index	18			
XAB54	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 6.0 Index	18			
XAB55	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 4.0 Index	18			
XAB56	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 6.0 Index	18			
XAB71	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 4.0 Index	18			
XAB72	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 6.0 Index	18			
XAB73	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 4.0 Index	18			
XAB74	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 6.0 Index	18			
XAB75	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 4.0 Index	18			
XAB76	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 6.0 Index	18			
STANDARD ABUTMENTS					
PAB01	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 4.0	19			
PAB02	Standard Abutment 0° GH 1.5 H 6.0	19			
PAB03	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 4.0	19			
PAB04	Standard Abutment 0° GH 3.0 H 6.0	19			
PAB05	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 4.0	19			
PAB06	Standard Abutment 0° GH 4.5 H 6.0	19			
PAB21	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 4.0	19			
PAB22	Standard Abutment 7.5° GH 1.5 H 6.0	19			
PAB23	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 4.0	19			
PAB24	Standard Abutment 7.5° GH 3.0 H 6.0	19			
PAB25	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 4.0	19			
PAB26	Standard Abutment 7.5° GH 4.5 H 6.0	19			

PRODUKTE

PRODUKTE

Bestell.-Nr.	Bezeichnung	Seite	
PAB51	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 4.0	19	
PAB52	Standard Abutment 15° GH 1.5 H 6.0	19	
PAB53	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 4.0	19	
PAB54	Standard Abutment 15° GH 3.0 H 6.0	19	
PAB55	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 4.0	19	
PAB56	Standard Abutment 15° GH 4.5 H 6.0	19	
PAB71	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 4.0	19	
PAB72	Standard Abutment 22.5° GH 1.5 H 6.0	19	
PAB73	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 4.0	19	
PAB74	Standard Abutment 22.5° GH 3.0 H 6.0	19	
PAB75	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 4.0	19	
PAB76	Standard Abutment 22.5° GH 4.5 H 6.0	19	
ABFORMKAPPEN FÜR STANDARD ABUTMENTS			
PAK01	Abformkappe H 4.0	20	
PAK02	Abformkappe H 6.0	20	
HEILUNSKAPPEN FÜR STANDARD ABUTMENTS			
PHK01	Heilungskappe H 4.0	20	
PHK02	Heilungskappe H 6.0	20	
PHK03	Heilungskappe H 4.0 rotationsgesichert	20	
PHK04	Heilungskappe H 6.0 rotationsgesichert	20	
LABORANALOG STANDARD ABUTMENTS			
PLA04	Laboranalog einteilig 0° H 4.0	20	
PLA06	Laboranalog einteilig 0° H 6.0	20	
PLA24	Laboranalog einteilig 7.5° H 4.0	20	
PLA26	Laboranalog einteilig 7.5° H 6.0	20	
PLA54	Laboranalog einteilig 15° H 4.0	20	
PLA56	Laboranalog einteilig 15° H 6.0	20	
PLA74	Laboranalog einteilig 22.5° H 4.0	20	
PLA76	Laboranalog einteilig 22.5° H 6.0	20	
MODELLIERHILFSKAPPEN FÜR STANDARD ABUTMENTS			
PMK01	Modellierhilfskappe H 4.0	21	
PMK02	Modellierhilfskappe H 6.0	21	
PMK03	Modellierhilfskappe H 4.0 rotationsgesichert	21	
PMK04	Modellierhilfskappe H 6.0 rotationsgesichert	21	
OKKLUSALSCHRAUBEN			
P0S01	Okklusalschraube	21	
P0SK1	Okklusalschraube für Keramik	21	

PRODUKTE

Bestell.-Nr.

Bezeichnung

Seite

ABUTMENT POSITIONIERUNGSSCHLÜSSEL

ZAPS1

Abutment Positionierungsschlüssel

21



REVISIONSHÜLSE

ZRH01

Revisionshülse

21,26,39,46



AUSWAHLPFOSTEN GERADE (OHNE INDEX)

PAP01

Auswahlpfosten 0° GH 1.5 H 4.0

22



PAP02

Auswahlpfosten 0° GH 1.5 H 6.0

22

PAP03

Auswahlpfosten 0° GH 3.0 H 4.0

22



PAP04

Auswahlpfosten 0° GH 3.0 H 6.0

22

PAP05

Auswahlpfosten 0° GH 4.5 H 4.0

22



PAP06

Auswahlpfosten 0° GH 4.5 H 6.0

22

AUSWAHLPFOSTEN ABGEWINKELT (OHNE INDEX)

PAP51

Auswahlpfosten 15° GH 1.5 H 4.0

22



PAP52

Auswahlpfosten 15° GH 1.5 H 6.0

22

PAP53

Auswahlpfosten 15° GH 3.0 H 4.0

22



PAP54

Auswahlpfosten 15° GH 3.0 H 6.0

22

SCHULTERABUTMENTS

PSA01

Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 1.5 H 6.0

23



PSA02

Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 3.0 H 6.0

23

PSA05

Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 1.5 H 4.0

23

PSA06

Schulterabutment 0° Ø 5.7 GH 3.0 H 4.0

23

PSA11

Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 1.5 H 6.0

23



PSA12

Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 3.0 H 6.0

23

PSA15

Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 1.5 H 4.0

23

PSA16

Schulterabutment 0° Ø 4.3 GH 3.0 H 4.0

23

PSA51

Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 1.5 H 6.0

23



PSA52

Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 3.0 H 6.0

23

PSA55

Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 1.5 H 4.0

23

PSA56

Schulterabutment 15° Ø 5.7 GH 3.0 H 4.0

23

PSA61

Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 1.5 H 6.0

23



PSA62

Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 3.0 H 6.0

23

PSA65

Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 1.5 H 4.0

23

PSA66

Schulterabutment 15° Ø 4.3 GH 3.0 H 4.0

23

TI-BASE INDEX

XTB01

Ti-Base 0° GH 0.75 H 6.0 Index

24



XTB02

Ti-Base 0° GH 1.5 H 6.0 Index

24

XTB03

Ti-Base 0° GH 3.0 H 6.0 Index

24

XTB04

Ti-Base 0° GH 0.75 H 4.0 Index

24

XTB05

Ti-Base 0° GH 1.5 H 4.0 Index

24


XTB06

Ti-Base 0° GH 3.0 H 4.0 Index

24

PRODUKTE

PRODUKTE

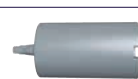Bestell.-Nr.		Bezeichnung	Seite	
TI-BASE				
PTB01	Ti-Base 0° GH 0.75 H 6.0	24		
PTB02	Ti-Base 0° GH 1.5 H 6.0	24		
PTB03	Ti-Base 0° GH 3.0 H 6.0	24		
PTB04	Ti-Base 0° GH 0.75 H 4.0	24		
PTB05	Ti-Base 0° GH 1.5 H 4.0	24		
PTB06	Ti-Base 0° GH 3.0 H 4.0	24		
CEREC BASE INDEX				
XTBC1	CEREC Base GH 0.75 Index	25		
XTBC2	CEREC Base GH 1.5 Index	25		
XTBC3	CEREC Base GH 3.0 Index	25		
PRE-FACE ABUTMENTS INDEX				
XPMB3	Pre-Face Abutment Ø 11.5 Index	26		
XPMB4	Pre-Face Abutment Ø 16.0 Index	26		
PRE-FACE ABUTMENTS				
PPMB3	Pre-Face Abutment Ø 11.5	26		
PPMB4	Pre-Face Abutment Ø 16.0	26		
REVISIONSINSTRUMENTE				
ZAI01	Ausstoßinstrument manuell	26, 39		
ZAI51	Ausstoßinstrument maschinell, kurz	26, 39, 46		
ZAI52	Ausstoßinstrument maschinell, lang	26, 39, 46		
REVISIONSHÜLSE				
ZRH01	Revisionshülse	21, 26, 39, 46		
OT EQUATOR ABUTMENTS				
P0T01	OT Equator GH 1.5	28		
P0T02	OT Equator GH 3.0	28		
P0T03	OT Equator GH 4.5	28		
P0T04	OT Equator GH 6.0	28		
OT EQUATOR SETS UND KITS				
P0TC2	OT Equator GH 1.5 Set	28		
P0TC3	OT Equator GH 3.0 Set	28		
P0TC4	OT Equator GH 4.5 Set	28		
P0TC5	OT Equator GH 6.0 Set	28		
P0TC1	Caps Assortment Kit korrigiert Implantatdivergenzen bis zu 30°	28		
P0TK1	Smart box Equator Kit korrigiert Implantatdivergenzen bis zu 50°	28		
RETENTIONSEINSÄTZE				
enthalten in P0TC1 / P0TK1	OT Equator Gelbe Kappe extra weiche Retention - 600 g	29		
	OT Equator Pinke Kappe weiche Retention - 1200 g	29		
	OT Equator Klare Kappe standard Retention - 1800 g	29		
	OT Equator Violette Kappe starke Retention - 2700 g	29		

PRODUKTE

Bestell.-Nr.		Bezeichnung	Seite	
OT EQUATOR ZUBEHÖR				
POTA1	Laboranalog	29		
POTT1	Übertragungskappe	29		
ZOT01	Vierkantschlüssel für manuelle Insertion	29		
ZOT02	Einsatz- und Aushebeinstrument für Retentionseinsätze	29		
ZOT03	Vierkantschlüssel mit RA-Schaft	29		
ALLGEMEINE INSTRUMENTE				
ORB01	Rosenbohrer	32, 41, 49		
OIB01	Initialbohrer, kurz	32,41,44,49		
OIB02	Initialbohrer, lang	32, 49		
ORL01	Richtungslehre	32, 41		
OSB01	Spiralbohrer, lang	32,41,44,49		
OSB02	Spiralbohrer, kurz	32, 41, 49		
ZBV01	Bohrerverlängerung	32,37,41,44		
ZBV02	HT Bohrerverlängerung	32, 37, 41		
TRI-SPADE BOHRER				
ATS01	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 XS	33, 45, 49		
ATS02	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 S	33, 49		
ATS03	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.4 M	33,42,45,49		
ATS12	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.9 S	33, 49		
ATS13	Tri-Spade Bohrer A Ø 2.9 M	33, 42, 49		
MTS01	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 XS	33, 45, 49		
MTS02	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 S	33, 49		
MTS03	Tri-Spade Bohrer M Ø 2.9 M	33,42,45,49		
MTS12	Tri-Spade Bohrer M Ø 3.3 S	33, 49		
MTS13	Tri-Spade Bohrer M Ø 3.3 M	33, 42, 49		
BTS01	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 XS	33, 49		
BTS02	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 S	33, 49		
BTS03	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.3 M	33, 43, 49		
BTS12	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.8 S	33, 49		
BTS13	Tri-Spade Bohrer B Ø 3.8 M	33, 43, 49		
KONISCHE AUSREIBER				
AKA01	Konische Ausreiber A 6.6 / 8.0	34, 42, 49		
AKA02	Konische Ausreiber A 9.5	34, 42, 49		
AKA03	Konische Ausreiber A 11.0	34, 42, 49		
AKA04	Konische Ausreiber A 14.0	34, 42, 49		
MKA01	Konische Ausreiber M 6.6 / 8.0	34,42,45,49		
MKA02	Konische Ausreiber M 9.5	34,42,45,49		
MKA03	Konische Ausreiber M 11.0	34,42,45,49		
MKA04	Konische Ausreiber M 14.0	34,42,45,49		
BKA01	Konische Ausreiber B 6.6 / 8.0	34, 43, 49		
BKA02	Konische Ausreiber B 9.5	34, 43, 49		
BKA03	Konische Ausreiber B 11.0	34, 43, 49		
BKA04	Konische Ausreiber B 14.0	34, 43, 49		

PRODUKTE

Bestell.-Nr.		Bezeichnung	Seite	
KORTIKALISSENKER				
AKS01	Kortikalissenker A	35, 42, 49		
MKS01	Kortikalissenker M	35, 43, 49		
BKS01	Kortikalissenker B	35, 43, 49		
GEWINDESCHNEIDER				
AGS01	Gewindeschneider A Ø 3.5	35, 42, 49		
MGS04	Gewindeschneider M Ø 4.0	35, 43, 45, 49		
BGS02	Gewindeschneider B Ø 4.5	35, 43, 49		
DREHMOMENTRATSCHEN				
ZRA01	Ratsche	36		
ZDMA1	Drehmomentaufsatz	36		
ZRA02	Drehmomentratsche	36, 46		
ZRA03	Biegestab-Drehmomentratsche	36, 41		
WERKZEUGE				
ZGS01	Gabelschlüssel	37, 41, 44		
ZHS01	Hülsenschlüssel	37, 40		
ZHT0S	High Torque Adapter S	37, 41		
ZHT0M	High Torque Adapter M	37, 41, 44, 47		
ZSD0S	Schraubendreher S	37, 41, 44, 46, 47		
ZSD0L	Schraubendreher L	37, 41, 47		
ZSD1S	Schraubendreher einteilig L	37, 41		
ZSDXS	Schraubendreher einteilig XS	37, 41		
ZEHXL	Eindrehhandgriff XL	38		
ZEI01	Eindrehinstrument S	38, 40, 44		
ZEI02	Eindrehinstrument L	38, 40		
ZEI0R	O-Ring Eindrehinstrument	38		
ZRD11	Rückdrehinstrument	39, 41, 44		
ZAD01	Ausdrehdorn, kurz	39		
ZAD02	Ausdrehdorn, lang	39		
ZHR01	Handrad für Ratscheneinsatz	39, 41, 47		
ZHR02	Handrad für Schraubendreher	39, 46		
ZHG01	Haltegriff, Labor	39		
SORTIMENTE				
PAP00	Auswahlpfosten Set	22		
OCK02	Chirurgie Kassette myplant	40		
CKB40	Chirurgie Kassette 4.0	44		
PPB03	Prothetikbox	46		
PLB01	Laborbox	47		



Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de • www.meisinger.de

Made in Germany



T W O