

ANSPRUCHSVOLLES
ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM

P
O
L
L
A

SDI



P O L A

ANSPRUCHSVOLLES
ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM

Empfehlen Sie Ihren Patienten das ideale Zahnaufhellungssystem

IN DER PRAXIS



Pola Rapid

6% hydrogen peroxide

3 Anwendungen à 15 Minuten

FÜR ZU HAUSE

Pola Day

6% Wasserstoffperoxyd

1 bis 2 Anwendungen à 30 Minuten oder
1 Anwendung à 45 Minuten täglich

Pola Night

Anmerkung: 1% Wasserstoffperoxyd entspricht 2,77% Carbamidperoxyd

10% Carbamidperoxyd

2 Stunden täglich oder über Nacht

16% Carbamidperoxyd

90 Minuten täglich oder über Nacht

Pola for Aligners

10% Carbamidperoxyd

1 × 2 Stunden täglich bis über Nacht

Pola Light

6% Wasserstoffperoxyd

2 × 10 Minuten oder 2 × 15 Minuten täglich

FÜR UNTERWEGS

Pola Luminate

6% Wasserstoffperoxyd

2 Anwendungen à 30 Minuten täglich





Behandlungen

A woman with blonde hair, wearing a dark blue sleeveless dress, is sitting in a chair. She is looking towards the camera with a slight smile. Her right hand is resting on her chin, and she is wearing a ring and a bracelet. The background is dark and out of focus.

Für die Praxis

Pola Rapid

Pola Rapid ist der neue Zahnaufheller für die Praxis, der Zähnen in 45 Minuten auf sichere Weise eine hellere Farbe verleiht.

Die einzigartige Formulierung mit 6 % Wasserstoffperoxid setzt die Wirkstoffe sofort frei.

Indikationen:

1. Aufhellung verfärbter vitaler Zähne.
2. Aufhellung verfärbter devitaler Zähne.

Exzellente Handhabung und schnelle Entfernung

Pola Rapid ist ein höherviskoses Gel, das sich dank der speziellen nichtklebrigen Formulierung schneller auftragen und entfernen lässt. Pola Rapid ist rasch und leicht auspressbar und bleibt nach dem Auftrag auf den Zähnen.

Optimiertes blaues Gel für schnelleres auftragen

Das optimierte blaue, nicht klebrige Pola Rapid ist gut sichtbar und erleichtert und beschleunigt sowohl das Auftragen als auch das Entfernen des Gels.

Einfache Verarbeitung und präzises Auftragen

Ein Anmischen des Gels ist nicht nötig. Die Doppelkammerspritze mischt das Gel direkt beim Auftragen auf den Zahn. Mit dem zugehörigen Pinselaufsatz wird das Gel gleichmäßiger und präziser aufgetragen.

Einfache Vorgehensweise

Kein Gingivaschutz notwendig. Durch die einfache Vorbereitung und die schnelle Einwirkzeit pro Durchgang wird die Behandlungszeit verkürzt und die Produktivität verbessert.

Integrierte Desensibilisierung

Pola Rapid wirkt durch eine einzigartige integrierte Desensibilisierung postoperativer Empfindlichkeit entgegen. Der zentrale schmerzreduzierende Bestandteil Kaliumnitrat wirkt beruhigend und verhindert so Empfindlichkeit. Der hohe Wasseranteil von Pola Rapid sorgt für maximalen Komfort während und nach der Behandlung.


Fluoridabgabe zur Stärkung der Zähne

Pola Rapid enthält auch Fluorid zur Stärkung der Zähne und zum Schutz vor Empfindlichkeit.

Anwendung mit und ohne Bleaching-Lampe

Pola Rapid ist mit und ohne Bleaching-Lampe anwendbar, weil es nicht wärmeaktiviert wird.



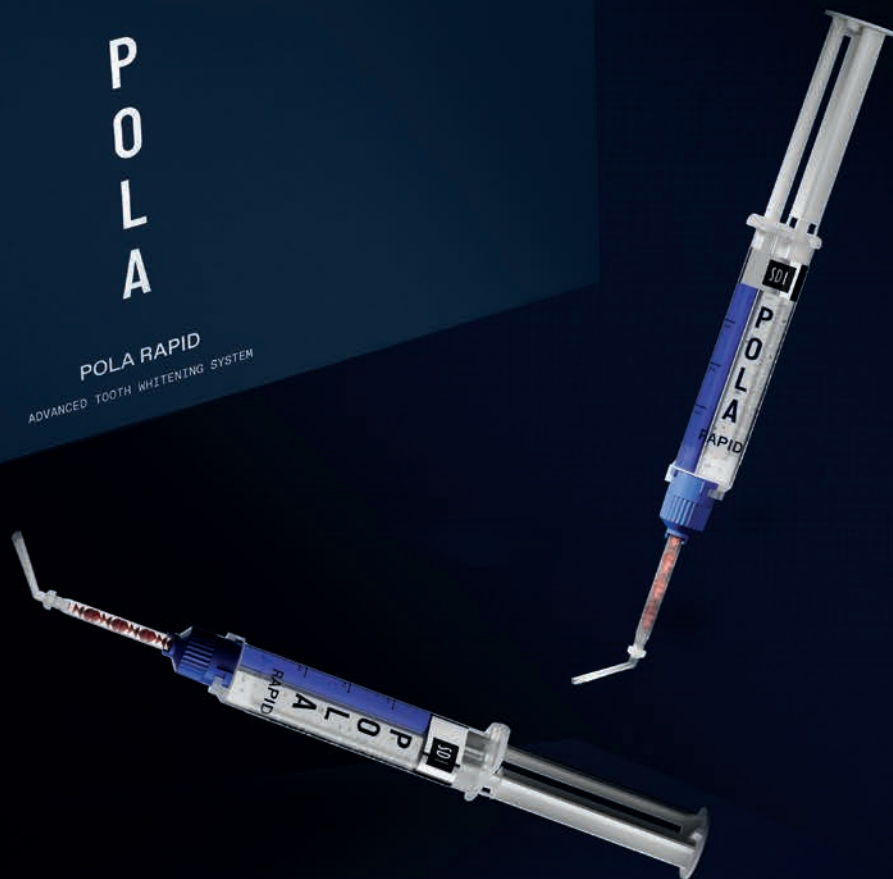



Behandlungen

Für zu Hause



Pola Day

Pola Night





Natürlich pflegende Zusatzstoffe

Durch die Zugabe von natürlich pflegenden Zusatzstoffen wird die Plaquebildung reduziert und die Remineralisierung unterstützt.

Das Auftreten von Sensitivitäten wird gemindert. Antibakterielle Eigenschaften unterstützen Gesundheit der Zähne.

Hoher Wasseranteil

Der hohe Wasseranteil des Gels reduziert die Dehydrierung des Schmelzes und beugt so Sensitivitäten vor.

Spezielles Verdickungsmittel

Durch das verwendete Verdickungsmittel wird das Gel weder klebrig noch klumpig und lässt sich angenehm in der Schiene tragen.

Hohe Viskosität

Das hochviskose Gel kann einfach und sicher in die Schiene appliziert werden, es läuft nicht heraus.

Angenehmer Geschmack

Der angenehme Pfefferminzgeschmack ist anhaltend und frisch.

Fluoride freisetzend

Die Zugabe von Fluoriden ermöglicht die Remineralisierung des Zahnschmelzes und reduziert so Sensitivitäten.

Enthält desensibilisierenden Zusatzstoff

Pola Day und Pola Night Gel enthalten einen speziellen, desensibilisierenden Zusatzstoff, der auf den Nerv einwirkt und somit Sensitivitäten minimiert und den Komfort des Patienten maximiert.

Pola For Aligners

Korrigieren und gleichzeitig aufhellen

Das Pola-Zahnaufhellungsgel für Aligner ist perfekt für die Verwendung mit kieferorthopädischen Aligner-Schienen formuliert.

Wir präsentieren das Pola Aufhellungsgel für Aligner, perfekt formuliert für den Gebrauch mit kieferorthopädischen Alignern. Pola For Aligners ist einfach zu Hause anwendbar und bietet eine positive Patientenerfahrung durch ein helleres, weißeres Lächeln ohne zusätzliche Tragedauer.

Pola For Aligners bietet alle Vorteile der preisgekrönten Aufhellungsformel von Pola

- Höchster Patientenkomfort bei einem Zahnaufheller
- Kaliumnitrat und Fluorid zur Reduzierung von Empfindlichkeit und lange Anwendbarkeit
- Dank hoher Viskosität lässt sich das Gel einfach und sicher in den Aligner einbringen und bleibt an Ort und Stelle.

Erhältlich im praktischen 4-Spritzen-Kit – für zu Hause, zum Tragen bei Tag oder Nacht

- Das Pola For Aligners System ist erhältlich mit Pola Night 10% Carbamidperoxid-Gel, das als idealer Aufheller für jedes Aligner-System sorgfältig ausgewählt wurde. Es erlaubt den Patienten eine individuelle Anwendung, ob nur einige Stunden pro Tag zwischen den Mahlzeiten oder komfortabel über Nacht.
- Basierend auf klinischer Forschung ist 10% Carbamidperoxid der Goldstandard in der Zahnaufhellung, der optimale Resultate mit Patientensicherheit und -komfort auf höchstem Niveau verbindet.*



SICHER UND KOMFORTABLE ÜBER NACHT



EINFACHE HANDHABUNG



FLUORID FREISETZEND



VON ZAHNÄRZTEN VERWENDET UND EMPFOHLEN





Pola Light

Ein neues erweitertes Zahnaufhellungs System mit LED-Technologie

Geniessen Sie ein helleres,
vertrauensvolleres Lächeln in 5 Tagen.

Pola Light ist ein modernes Zahnaufhellungssystem, das die preisgekrönte Aufhellungsformel von Pola mit einem LED-Mundstück für eine schnellere Aufhellungsbehandlung kombiniert.

- Pola Light ist mit Pola Day Gel erhältlich.
- Schnell wirksam, für weißere Zähne in nur 5 Tagen.
- Formuliert für sichere Entfernung von Langzeitverfärbungen.
- Für zukünftige Zahnaufhellungen voll wiederaufladbar.
- Remineralisation stärkt die Zähne.
- Zusätzliche Hydratisierung minimiert Empfindlichkeit.



Scan QR Code für
Schritt für Schritt
Anleitung.



SCHON AB 20 MIN. PRO TAG

2 x 10 oder 2 x 15 Minuten Behandlungszeit pro Tag.



EINFACH IN DER HANDHABUNG

Portabel, wiederaufladbar und einfach zu tragen, ohne dass ein Kabel am Mundstück befestigt ist. Das Mundstück hat eine Universalgröße, bei der die Ober- und Unterkieferzähne gleichzeitig aufgehellt werden.



WEISSERE ZÄHNE IN FÜNF TAGEN

5 Behandlungstage. Keine Stuhlzeit oder individuelle Schiene erforderlich, was sowohl für den Patienten als auch für den Zahnarzt Zeit spart.




VON ZAHNÄRZTEN VERWENDET UND EMPFOHLEN

Pola ist ein professionelles Zahnaufhellungssystem, dem Zahnärzte vertrauen und ihren Patienten empfehlen, um ein sichereres, schnelleres und weißeres Lächeln zu erzielen.

Dank hoher Viskosität und neutralem pH sorgen die Gele für den höchsten Patientenkomfort bei einem Zahnaufhellungssystem für zu Hause.

Die einzigartige Mischung schonender Zusatzstoffe und der hohe Wasseranteil verringern Empfindlichkeiten.

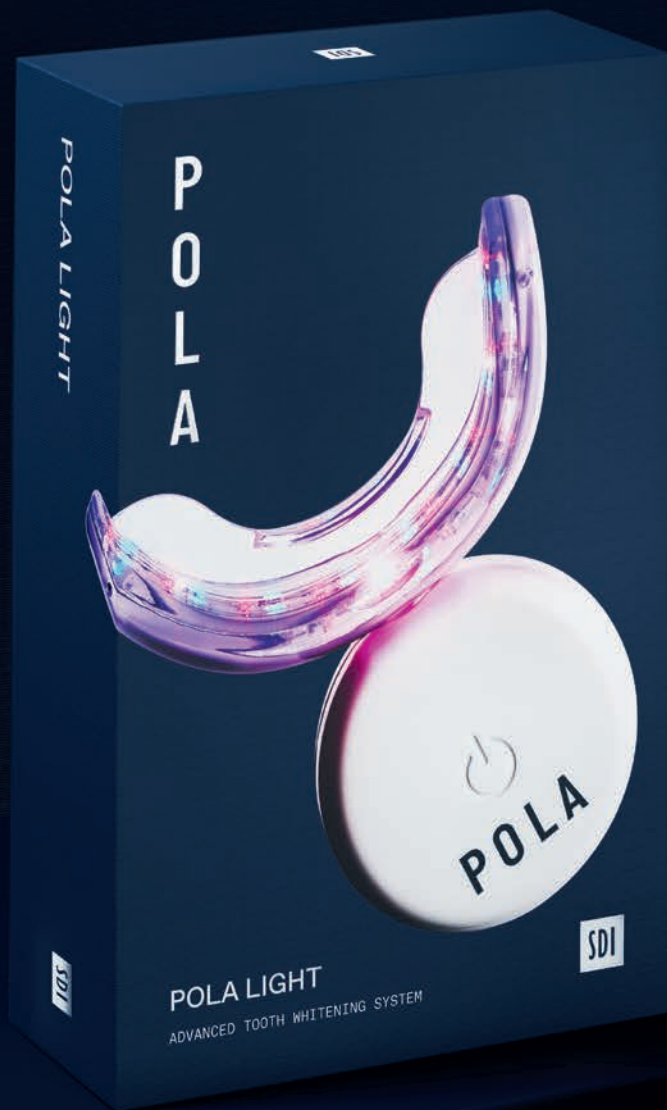



Für Unterwegs



Behandlungen

Pola Luminare



Frischen Sie das Strahlen mit Pola Luminare auf! Mit 6% Wasserstoffperoxid ist Pola Luminare unser wirksamstes Zahnaufhellungsgel mit Pinselapplikator. Pola Luminare passt leicht in Jacken oder Handtaschen und lässt sich an jedem beliebigen Ort verwenden, wann immer sich die Gelegenheit ergibt. Es ist das ideale Produkt ein strahlend weißes Lächeln beizubehalten.







Pola Whitening Stand

EINFACHES DESIGN

Der schlanke, intelligent gestaltete Pola Whitening Stand eignet sich für die Polymerisationslampe Radies Xpert.

VIELFÄLTIGE BEWEGLICHKEIT UND EINSTELLBARKEIT

Der Pola Whitening Stand hat fünf Drehpunkte; er ist um bis zu 360° drehbar, so dass Sie exakt Ihre Wunschposition einstellen können.

FLEXIBILITÄT

Der Ständer kann neben oder hinter dem Patienten aufgestellt werden, je nach den räumlichen Gegebenheiten.

AUSSTATTUNG MIT ROLLEN

Der Pola Whitening Stand ist mit Rollen ausgestattet und daher einfach und sicher von Raum zu Raum bewegbar.

LEICHT, KABELLOS UND KOMPAKT


Der leichte und kabellose Ständer kann mühelos bewegt und positioniert werden. Dank seiner kompakten Bauweise ist er leicht zu reinigen und bei Nichtgebrauch zu verstauen.

STABILITÄT DES SYSTEMS

Dank der Bremsen bleibt der Ständer bei Gebrauch fest an Ort und Stelle.



Scan QR Code für
Schritt für Schritt
Anleitung.

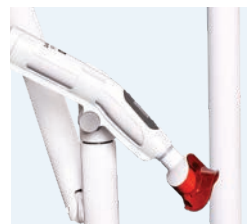

KLINISCHE FÄLLE



Dr Vijay Vadher
UK

Pola Night 16%



Dr Linda Greenwall
UK

Pola Night 10% CP for Aligners



Dr. David Carralero Plaza
Spain

Pola Day 6%



**Dr. Mohamed
Abdulmonem Abdulsalam**
Egypt

Pola Light 6%



F




A

Was verursacht Zahnverfärbungen?

Zähne sind von Mensch zu Mensch verschieden, und damit auch die Arten der Verfärbung. In der Regel werden Zahnverfärbungen durch Kaffee, Schwarztee, Kräutertee, Rotwein, stark gewürztes Essen wie etwa Curry oder Zigaretten verursacht.

Wie funktioniert Zahnaufhellung?

Der Zahnaufheller zerfällt beim Auftragen auf den Zahn in Wasser und Sauerstoffionen. Die Sauerstoffionen dringen in den Schmelz ein und zersetzen die langen Moleküle der verfärbenden Stoffe effektiv in kurze, farblose. Diese Moleküle werden dann auf natürliche Weise durch den Speichel vom Zahn entfernt. Das Ausmaß der Aufhellung hängt von der Menge der verfügbaren Ionen und der Dauer ihrer Einwirkung auf den Zahn ab.

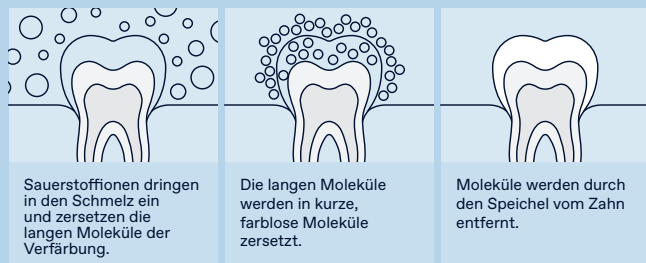

Wie lange dauert die Zahnaufhellung bei einem Patienten?

Zahnaufheller zur Anwendung in der Zahnarztpraxis können bereits nach 30 Minuten erste Resultate zeigen.

Q

Wie lange hält die Wirkung des Aufhellers an?

Das hängt vom jeweiligen Patienten und seinen oralen Gewohnheiten ab. Aufhellungen sollten alle 6-12 Monate erneuert werden, ob in der Praxis oder zu Hause.

Verändern Restaurationen oder Veneers bei der Zahnaufhellung ihre Farbe?

Die Aufhellung entfernt Verfärbungen von den Restaurationen oder Veneers, verändert aber nicht ihre Originalfarbe.

Gibt es Nebenwirkungen?

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Bei den meisten Menschen treten keine Nebenwirkungen auf. In manchen Fällen ist aber zeitweilige Überempfindlichkeit (Schmerz dumpf oder stechend, bei Wärme oder Kälte) möglich. Diese klingen jedoch einige Stunden nach der Behandlung ohne bleibende Probleme wieder ab. Zur Vermeidung von Sensibilitäten kann die Schiene kürzer oder nicht so häufig getragen werden. Auch sollte zur Vermeidung von Überempfindlichkeit keine kohlenensäurehaltigen Getränke, Zitrusfrüchte oder deren Saft zu sich genommen werden.

Ist eine Zahnaufhellung in der Schwangerschaft ratsam?

In der Schwangerschaft sollten keine Zahnaufheller angewandt werden.

Pola In der Praxis

POLA RAPID

Pola Rapid 6% 1 Spritzen Kit 1 × 2.8 mL Pola Rapid Spritze	7700510
Pola Rapid 6% 3 Spritzen Kit 3 × 2.8 mL Pola Rapid Spritzen	7700511

POLA WHITENING STAND

1 x Ständer 1 x Halterung für SDI Radii Plus 1 x Halterung für SDI Radii Xpert Zubehör	7700989
---	---------

Pola für Zuhause

Bitte beachten: Jede Packung enthält Zubehör.
CP: Carbamidperoxid HP: Wasserstoffperoxid

POLA DAY

Pola Day Mini Kit 4 × 1.3g Spritzen (6% HP)	7700357
Pola Day 10 Spritzen Kit 10 × 1.3g Spritzen (6% HP)	7700359
Pola Day Vorratspackung 50 × 1.3g Spritzen (6% HP)	7700361
Pola Day Vorratspackung 50 × 3g Spritzen (6% HP)	7700079

POLA NIGHT

Pola Night Mini Kit 4 × 1.3g Spritzen (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night 10 Spritzen Kit 10 × 1.3g Spritzen (10% CP) (16% CP)	7700371 7700377
Pola Night Vorratspackung 50 × 1.3g Spritzen (10% CP) (16% CP)	7700373 7700379
Pola Night Vorratspackung 50 × 3g Spritzen (16% CP)	7700085

POLA FOR ALIGNERS

Pola For Aligners (10% CP) 4 × 3g Spritzen	7700556
---	---------

AUFBEWAHRUNGSDOSE FÜR ZAHNSCHIENEN

5 Stück	7750008
---------	---------

POLA LIGHT

Pola Light (6% HP) 4 × 3g Pola Day Spritzen	7700985
--	---------

TIEFZIEHSCHIENEN

20 Stück	7750005
----------	---------

POLA LIGHT DISPLAY STAND

1 x Ständer	7700979
-------------	---------

SPACER RESIN AUSBLOCKMATERIAL

2 × 1 g Spacer Resin Spritzen	7700012
-------------------------------	---------

GINGIVAL BARRIER 2 SPRITZEN

2 × 1 g Gingival Barrier Spritzen Zubehör	7750006
--	---------


Pola für Unterwegs

POLA LUMINATE


1 × 5.5 mL Pola Luminate	7700092
--------------------------	---------

Kostenlose Marketingmaterialien


Zur Patientenaufklärung und Patientenpresentation

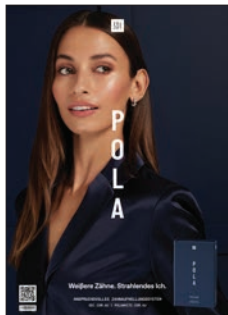

Poster Pola Day
Artikel M110156

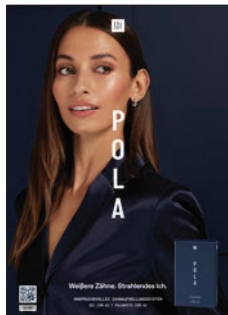

Poster Pola Night
Artikel M110157

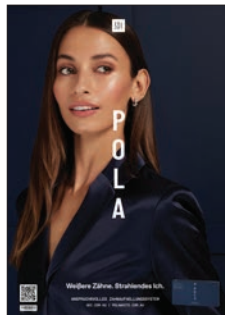


Poster Pola Rapid
Artikel M110158



Vorher & Nachher Ständer
Artikel M110041



Patientenbroschüre Display
Artikel M110045

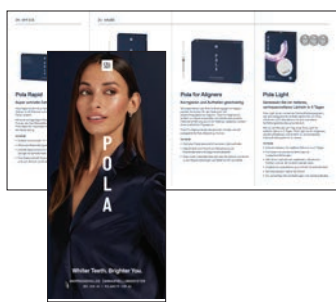

Pola Patientenbroschüre
Artikel M110043



Pola Light Patientenbroschüre
Artikel M110046



Pola Papiertasche gross
Artikel M1100332



Pola Papiertasche klein
Artikel M1100331



Pola Wartezimmer USB Video
Artikel M1100245



Anpassbares Marketing Material
Mehr anpassbare Werbematerialien finden Sie in unserem Downloadbereich.
Besuchen Sie: www.sdi.com.au

SDI

SDI Limited forscht, entwickelt,
fertigt und vertreibt dentale
Restaurationsmaterialien.

SDI Produkte sind eine Kombination
aus Innovation und Kompetenz um
dem Zahnarzt ideale restaurative
Materialien zu bieten.

MADE IN AUSTRALIA

by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIEN 1 800 337 003
ÖSTERREICH 00800 022 55 734
BRASILien 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 022 55 734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759
ITALIEN 00800 022 55 734
SPANIEN 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & KANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
[@pola_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

Für mehr Information besuchen Sie:

polawhite.com.au



02-2026

M110049 C